

## Sovituksen tarkistuslista:


- Kulho, keraaminen tai lasinen
- Kuumaa, mutta ei kiehuva vettä (85 celsiusastetta).
- Haarukka tai vastaava väline
- Peili

## Ohjeet:

1. Pese kätesi ja materiaali miedolla saippualla ja vedellä.
2. Kuumenna vesi noin 80/85 °C:seen esimerkiksi vedenkeittimessä, liedellä tai mikroaaltouunissa. Upota purentakisko veteen, kunnes materiaalista tulee pehmeää ja taipuisaa (30-60 sekuntia). Kun se on pehmentynyt, nosta SOVA-purentakisko varovasti vedestä.



3. ÄLÄ anna pehmentyneen purentakiskon taittua - materiaali liimautuu yhteen, jolloin sitä on vaikea muotoilla uudelleen.
4. Pidä purentakiskoa molemmilla käsillä ja työnnä se varovasti suuhusi. **Varmista, että takimmainen sisäharju ei taitu sisäänpäin.** Kun suojus on oikeassa asennossa, sulje huulet suojuksen päälle ja aseta kieli kitalakeen. **Pure varovasti - älä tee syviä hampaanjälkiä.**

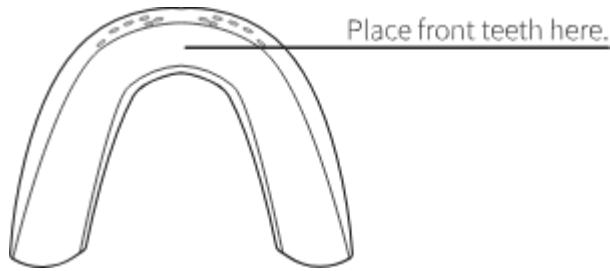

5. Luo imua varovasti nielemällä, kunnes materiaali on kovettunut tiiviiksi ja täydellisesti istuvaksi. Pidä SOVA Night Guard -purentakiskoa suussa 3-5 minuuttia, jotta muoto ehtii jähmettyä. Kun kisko on kovettunut, sen pitäisi olla niin tiukka, ettei se putoa, kun avaat suusi.

Oletko tyytymätön istuvuuteen? EI HÄTÄÄ! Jokainen SOVA Night Guard -suoja voidaan muotoilla uudelleen jopa 20 kertaa. Laita vain muotoiltu SOVA Night Guard takaisin kuumaan veteen, anna sen pehmentyä ja suoristua, ja valmista on! Toisen kierroksen aika.

ÄLÄ TEE TÄTÄ:

- Käytä kiehuva vettä muotoiluun.
- Venytä materiaalia liikaa – kisko voi revetä. \*ÄLÄ käytä, jos se on vaurioitunut.
- Ime ilmaa liian innokkaasti, jolloin istuvuus on liian tiukka.
- Pure liian kovaa tai aiheuta syviä puremajälkiä kiskoon.