

Suojaa puhkeavien molaarien fissuurat mahdollisimman aikaisin

Vasta puhjenneen epäkypsän molaarin suojaaminen on ratkaisevan tärkeää, koska se on erittäin altis happohyökkäyksille ensimmäisten 12 - 18 kuukauden aikana.

Toisin kuin yhdistelmämuovit, Fuji Triage sitoutuu kiilteeseen ja dentiiniin kemiallisesti kosteassa ympäristössä ja suojaa myös hampaan pinnan happo- ja bakteerihyökkäyksiltä.

Fissuuran pinnoittaminen: vaihe vaiheelta



Poista plakki fissuuroista ja oklusaalipinnalta. Ei sidosaineita - ei etsausta



Fuji Triage kapselin ohut kärki ja juoksevuus auttavat sitä tunkeutumaan syviin fissuuroihin. Moniin käyttötarkoituksiin riittää yksi kapseli.



Fuji Triagen kovettumista voi nopeuttaa (nopeutettu kovetus) valokovetuslaitteen lämmöllä.



Vaaleanpunainen väri auttaa visualisoinnissa viennin ja seurannan aikana sekä helpottaa kommunikointia.

Tri M. Blaque, Ranska

Helppoa ja tehokasta suojausta nuorille potilaille

Maksimaalinen pintasuojaus

muutama helppo työvaihe



1. Poista plakki fissuuroista mekaanisesti harjakartion avulla.



2. Käytä GC Dentin Conditioneria oklusaalipinnan lisäpuhdistukseen. Vältä pinnan liiallista kuivaamista huuhtelun jälkeen.



3. Levitä ohut kerros Fuji Triagea oklusaalipinnalle, kuopat ja fissuurat mukaan lukien.



4. Nopeampi kovetus (nopeutettu kemiallinen kovetus) tapahtuu 20 - 40 sekunnissa* tai kemiallinen kovettuminen 4 minuutissa.



5. Levitä GC Fuji Varnish tai GC Fuji Coat LC heti viemisen jälkeen.

Tri E. Van Aeneongen,
Alankomaat

* Nopeutettu kovetus on mahdollista vain Fuji Triage Pink versiolla



GC Fuji Triage

Fuji Triage -kapselit
50 kapselia (sekoitettu tilavuus kapselia kohti 0,13 ml)

Fuji Triage -jauheneste
1-1-pakkaus: 15 g jauhe, 10 g (8 ml) neste, 6 g (5,7 ml) Dentin Conditioner, mittalusikka, sekoituslehtiö

Saatavana valkoisena ja vaaleanpunaisena.

Tarvikkeet optimaalisten tulosten saavuttamiseksi
Kiinnittymisen tehostamiseen:
GC Cavity Conditioner / GC Dentine Conditioner

Liiallisen kuivumisen estämiseen alkukovetuksen jälkeen:
GC Fuji Varnish / GC Fuji Coat LC

GC EUROPE N.V.
Head Office
Researchpark
Haasrode-Leuven 1240
Interleuvenlaan 33
B - 3001 Leuven
Tel. +32.16.74.10.00
Fax. +32.16.40.48.32
info@gceurope.com
http://www.gceurope.com

GC NORDIC AB
Finnish Branch
Vanha Hommaksientie 11B
FIN - 02430 Masala
Tel. & Fax. +358.9.221.82.59
info@finland.gceurope.com
http://finland.gceurope.com

GC

z L LF FI 2 09 12/10

Todella monipuolinen suoja kosteissakin olosuhteissa



Fuji Triage GC:ltä


Enemmän kuin pelkkä pinnoitusaine
Toimii hyvin myös vaikeissa
suun olosuhteissa

GC

Ensiluokkaista suojausta

Lapsi, aikuinen tai ikääntynyt, jokainen voi hyötyä Fuji Triagen tarjoamasta suojauksesta. Tämä ainutlaatuinen, kosteutta kestävä ja runsaasti fluoria luovuttava lasi-ionomeerisementti on potilaan ja hammaslääkärin ihanteellinen kumppani monissa tilanteissa!

- Itsesidostuminen ja tiivis sauma ilman sidosaineita tai etsausta

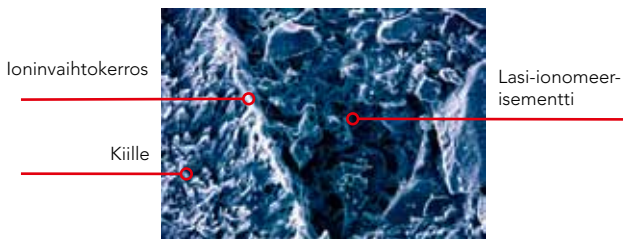


SEM-kuva tri H. Ngo.
Kuvassa on ioninvaihtokerros, joka merkitsee vahvaa kemiallista sidosta

- Esteettinen valkoinen väri tai vaaleanpunainen väri visuaalisoitiin ja tarkkailuun



Optimaalinen juoksevuus ja paikallaan pysyvyys

- Kuusinkertainen fluorin luovutus antaa äärimmäisen suojan

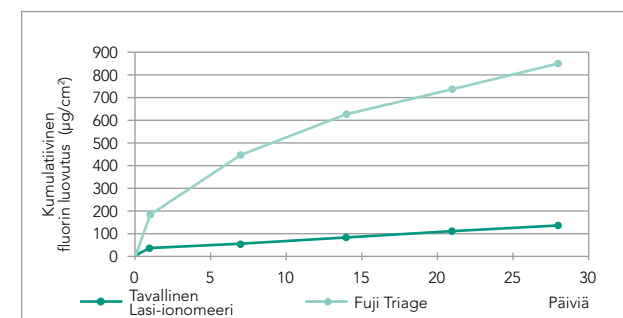

Fluorin luovutus on kuusinkertainen tavalliseen lasi-ionomeeriin verrattuna - paljon suurempi kuin yhdistelmämuovipinnoitteilla.

GC:n tutkimus- ja kehitysosaston sisäisiä testejä, jotka testineet saavutettua pyynnistä.



Kosteudenkestävyys mahdollistaa työskentelyn ilman eristystä tai kofferdamaa.

- Työskentele omaan tahtiisi: kovettuu itsestään 4 minuutissa tai nopeutetulla kovetuksella vain 20 - 40 sekunnissa*



Tri E. Van Amerongen, Alankomaat

*Nopeutettu kovettuminen vain Fuji Triage Pink versiossa


Hyväksi todettu ja tehokas suojaus monenlaisissa

kliinisissä tilanteissa

Fuji Triage on monipuolinen tuote kariksen ehkäisemiseen ja hallintaan. Se on suunniteltu erityisesti terveen hammasrakenteen säilyttämiseen ja remineralisoitumisen edistämiseen.

Kariksen tasapainottaminen

Kun potilaalla on useita aktiivisia leesioita, Fuji Triagea käyttämällä avoimet kaviteetit saa suljettua ja siten pysäytettyä kariksen etenemisen. Kariksen tasapainottamistekniikat ovat erityisen hyödyllisiä hoidettaessa ikääntyneitä, hammaslääkäripelosta tai terveysongelmista kärsiviä ja hyvin nuoria potilaita.

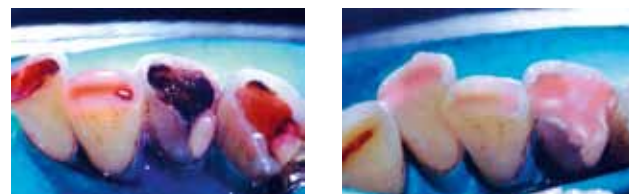

Tri H. Ngo, Australia

Vain pehmeä dentiini poistetaan ultrahitaan käsikappaleen tai käsi-instrumenttien avulla. Preparoidaan 2 mm:n puhtaat reunat optimaalisen tiiviyden takaamiseksi. Fuji Triage tiivistää demineralisoituneen dentiinin ja luovuttaa fluoria, joka auttaa sen uudelleenmineralisoitumista.

Epäsuora pulpan peittäminen

Erittäin syvässä kaviteeteissa pehmeämpi demineralisoitunut dentiinikerros pulpan päällä jätetään koskemattomaksi pulpan paljastumisen välttämiseksi** ja sisäisen demineralisoitumisen mahdollistamiseksi.



Tri H. Ngo, Australia

Fuji Triage:a on käytetty tehokkaan tiiviyden aikaansaamiseksi ja pulpan päällä olevan dentiinin parantamiseksi.

Mi- restauraatiot

Minimaalisten preparointitekniikoiden lisääntynyt käyttö on tuonut tarpeen juoksevammalle lasi-ionomeerille, joka muokkautuu hyvin mikropreparoituihin kaviteetteihin. Fuji Triage White on suositeltava ratkaisu juoksevuutensa, nopean kovettumisen, sileän pintansa ja estetiikkansa ansiosta.



Tri M. Basso, Italia

Mikropreparointi voidaan tehdä ultrahienoilla timanttiporilla, ilma-abraasio tekniikalla tai otsonihoitoilla.

**Edellyttäen, ettei potilaalla ole oireita peruuttamattomasta hammasytimen tulehduksesta

Juuripintojen suojaus ja kaulan eroosio

Paljastuneilla juuripinnoilla on demineralisaatio riski, johon liittyy kariesta ja eroosiota. Nyt nämä vaarassa olevat pinnat voidaan suojata aktiivisesti ohuella Fuji Triage kerroksella.



Tri H. Ngo, Australia

Juuripintojen suojausta tulee tarkkailla, etenkin jos potilaan syljenieritys on heikentynyt tai puskurikapasiteetti pienentynyt.

Herkkyden hoito

Fuji Triage, kemiallinen pinnoitusaine pysäyttää nesteen virtauksen dentiinitubuluksissa tuoden siten nopeaa ja pitkään kestävää helpotusta viiltelyyn.



Tri J. Frecken, Alankomaat

Sen jälkeen dentiinitubulukset voi pinnoittaa Fuji Triagella ilman etsausta tai sidosaineita.

Väliaikaiset paikkaus

Fuji Triage on hyvä, vaihtoehto väliaikaisiin ja välvaiheen paikkauksiin. Se tarjoaa ylivoimaisen suojan bakteereilta verrattuna sinkkioksidiin/eugenoliin ja sinkkifosfaattisementteihin. Fuji Triage ehkäisee myös sekundaarikariesta.



Tri Jo. Lafargues, Ranska

Vaaleanpunaisen sävyn avulla potilas voi selvästi tunnistaa Fuji Triagen väliaikaisena ratkaisuna. Haluttaessa voidaan käyttää myös Fuji Triage Whitea.

Väliaikainen endodonttinen suojaus

Kun Fuji Triagea käytetään heti juurikanavan täytön jälkeen, se takaa tehokkaan koronaalisen tiiviyden mikrovuotojen varalta ja fluorin luovutus auttaa ehkäisemään mahdollista kontaminaatiota tulevaisuudessa.



Tri A. Barab, Kroatia

Juurikanavien hoidon jälkeen Fuji Triage on ihanteellinen pohja laminoimille, esim. yhdistelmämuovipaikkausten alle.