

PERMAFLO® PURPLE

Juokseva yhdistelmämuovi



Micro 20 G -kärjet



KLIININEN MERKITYS JA KÄYTTÖ

Käytetään adhesiivisen järjestelmän kanssa luomaan helposti havaittava koronaalinen sulkku. Violetti väri helpottaa pulpakammion lattian paikantamista, kun pulpakammioon mennään jatkohoitoa varten.

PAKKAUSKOOT

PERMAFLO PURPLE -pakkaus

Tuotenro 71524 | Valm. koodi 962

2 kpl PermaFlo Purple-ruiskuja, 1,2 ml

Säilyvyysaika: 24 kk. Säilytetään jääkaapissa.

PERMAFLO PURPLE -KÄYTTÖOHJE




1. Juurikanava on preparoitu. Puhdista vedellä, jos olet käyttänyt EndoREZiä (jos huomattava määrä kovettumatonta EndoREZiä paljastuu kanavan aukossa, peitä ohuella kerroksella Ultra-Blendia ja valokoveta.)
Kuivaa ilmapuustilla. Huom!
Jos eugenolia tai eugenolipohjaisia tiivistysaineita on käytetty, odota kovettumista ja tuoreuta kaikki kammion ja preparoinnin pinnat timanttikoralla ennen sidostamista.




2. Etsä ja aseta Peak Universal Bond, valokoveta.

Vaihtoehtoisesti:
Käytä Peak SE -praimereita ja Peak LC Bondia.

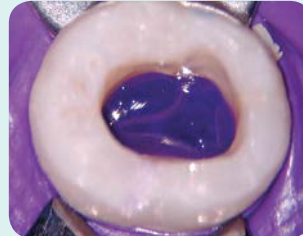

3. Annostele 1–1,5 mm paksuinen kerros violettiä PermaFlota. Valokoveta 20 sekuntia.
Etu: välitön "koronaalinen sulkku". Kun nastaa tai pilaria preparoidaan, violetti identifioi juurikanavapreparoinnin tai pulpakammion laajuuden.
Kontrasti kertoo hammaslääkärille pulpakammion katon paikan minimoiden perforaation riskin.

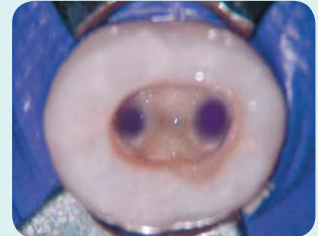

4. Voit myös annostella pelkääntään kanavan aukkojen päälle.

Annostele ensin dentiinisidosaine. Muistathan, että eugenolia sisältävät tiivistysaineet voivat haitata polymeroitumista. Suosittelemme EndoREZiä, joka on hydrofiilinen resiinitivistysaine.