



# Luja kuin kivi

G-ænial®  
Universal  
Injectable  
GC:ltä

Erittäin luja  
yhdistelmämuovi  
korjaavaan hoitoon


**GC**

## Kaikkiin kaviteettiluokkiin Ei tarvitse peittää

HLT Ahmed Al-Jaff, Irak



Alumiiniin nähden  
252-prosenttinen  
röntgenopaakisuus tekee  
seurannasta helppoa

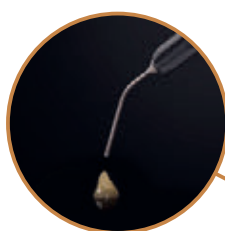

Huolellisen kehitystyön tulos:  
Materiaali ei lähde juoksemaan  
hallitsemattomasti, ja se irtoaa  
kärjestä helposti




Taivutettavat kärjet  
ylettyvät kaikenlaisiin  
kaviteetteihin



Ei valumista:  
Materiaali pysyy siinä,  
mihin se annostellaan



Helppo  
injektoida, mukava  
työskennellä

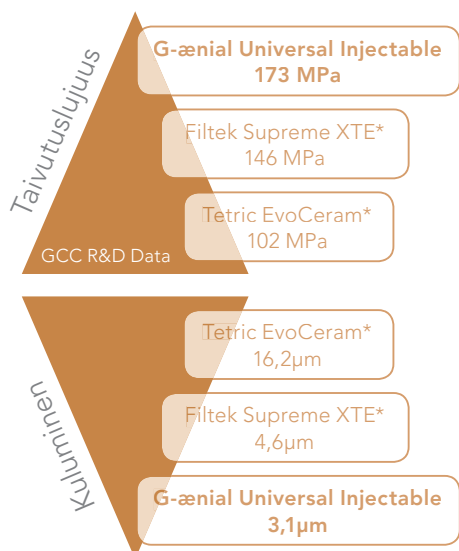

Erittäin  
pienikokoiset  
**bariumfillerit**  
(150 nm)  
ja **korkea**  
filleritiheys




**Full coverage**  
**Silane Coating (FSC)**  
-teknologian ansiosta  
fillerit **jakautuvat** ja  
**kiinnittyvät** matriisiin  
entistä paremmin



**Poikkeukselliset ominaisuudet**  
**Ei tahmaa**  
**Vaatii vain kevyen painalluksen**  
**Korkea röntgenopaakisuus**

# Aloita injektoiminen!

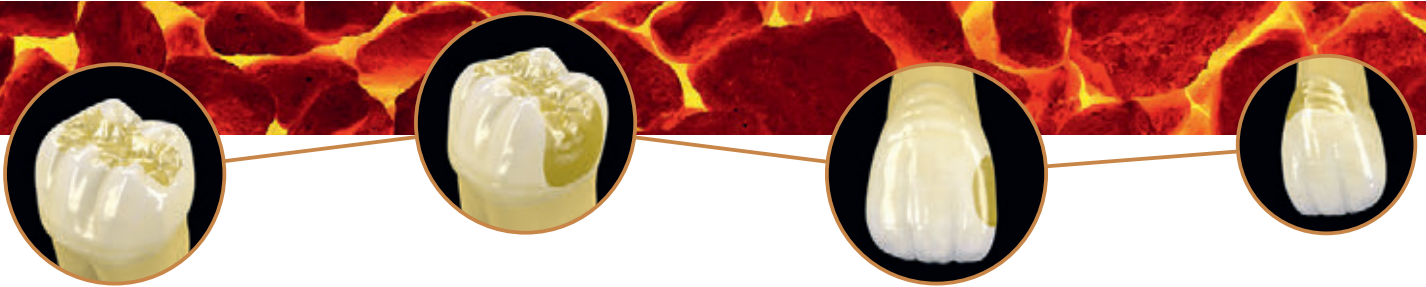

## Luokan II täyte



Ennen toimenpidettä  
hampaassa näkyy  
approksimaalista kariesta



Vanhan täytteen ja kariksen  
poisto



Taivutettavien kärkien ansiosta  
allemenoihin on helppo ylettyä



Approksimaalisen seinämän  
rakentaminen kiillevärillä JE



Matriisin poisto seinämän  
rakentamisen jälkeen



Nyt voidaan noudattaa luokan  
I toimenpidettä; dentiinikerros  
tehdään värillä A4



Viimeinen kerros kerrostetaan  
kiillevärillä JE.



Lopullinen tilanne viimeistelyn  
ja kiillotuksen jälkeen

HLT Javier Tapia Guadix, Espanja

## Luokan III täytteet



Luokan III kaviteetit ennen  
toimenpidettä



G-ænial Universal Injectable  
(A2) -muovin injektoiminen



Välitön tulos toimenpiteen  
jälkeen



Seurantakäynnillä täydellinen  
integraatio

HLT Ahmed Al-Jaff, Irak

# G-ænial® Universal Injectable GC:ltä

Nauti upeasta estetiikasta ja pitkäkestoisesta kiillosta!



HLT Florian Klumpp, Saksa



HLT Ali Salehi, Ranska

|                    | Standardivärit |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        | Sisävärit |        |        | Ulkovärit |        |
|--------------------|----------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-----------|--------|--------|-----------|--------|
|                    | XBW            | BW     | A1     | A2     | A3     | A3.5   | A4     | B1     | B2     | CV     | CVD    | AO1       | AO2    | AO3    | JE        | AE     |
| Ruisku 1 ml (1,7g) | 901471         | 901472 | 901473 | 901474 | 901475 | 901476 | 901477 | 901478 | 901479 | 901480 | 901481 | 901482    | 901483 | 901484 | 901485    | 901486 |



901503 - Annostelukärki  
Pitkä neula (30 kpl)



Tutustu myös GC:n universaaliin sidosaineeseen G-Premio BOND:

- 009030 – G-Premio BOND kokoomapakkaus, 5 ml
- 009036 – G-Premio BOND täyttöpakkaus, 5 ml
- 009032 – G-Premio BOND kolmen pullon pakkaus, 3 x 5 ml
- 009034 – G-Premio BOND, 50 yksittäispakkausta

**GC EUROPE N.V.**  
Head Office  
Researchpark  
Haasrode-Leuven 1240  
Interleuvenlaan 33  
B-3001 Leuven  
Tel. +32.16.74.10.00  
Fax. +32.16.40.48.32  
info.gce@gc.dental  
http://www.gceurope.com

**GC NORDIC AB**  
Finnish Branch  
Bertel Jungin aukio 5 (6. kerros)  
FIN-02600 Espoo  
Tel. +358.40.900.07.57  
info.finland@gc.dental  
http://finland.gceurope.com  
http://www.gceurope.com

