




Anna potilaillesi enemmän syytä hymyillä

Opalescence

Tooth Whitening

Vaaleampi hymy voi antaa potilaillesi uutta itseluottamusta, ja uusia syytä hymyillä. Ja potilaasi voivat valkaista hampaansa milloin ja missä itse haluavat, kun käyttävät Opalescence Go. Siinäpä jo syytä hymyillä.

Tehokas ja ammattimainen valkaisu "to go"!

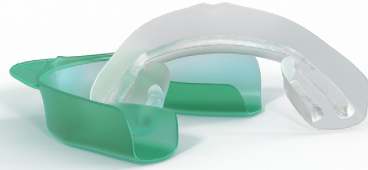

- Ainutlaatuinen lusikkamateriaali on erittäin miellyttävä käyttää ja muotoutuu paremmin hampaille.
- Lusikka kattaa alueen molaarista molaariin, ja geeli on paremmassa kosketuksessa takahampaiden kanssa.
- UltraFit-lusikka muotoutuu erinomaisesti hampaille ja mahdollisimman runsas määrä geeliä on kosketuksessa hampaiden kanssa valkaisuhoitoa aikana.
- Valmiste sisältää 6 % vetyperoksidia (käyttöaika 60–90 minuuttia).

SÄILYTÄ JÄÄKAAPISSA

Opalescence Go-potilaspakkaukset



Maku	6%
Mint	4634
Melon	3592

Pakkaus sisältää 10 läpipainopakkausta, jossa on 1 lusikka ylähampaille ja 1 lusikka alahampaille
1 kpl 20 ml:n (28 g) Opalescence-valkaisutahna

SÄILYTÄ JÄÄKAAPISSA

Opalescence Go-potilaspakkaukset 6 kpl/pakkaus



Maku	6%
Mint	4639
Melon	3593

10 kpl ylä-/alaleuan lusikkaa kussakin pakkauksessa
1 kpl 20 ml:n (28 g) Opalescence-valkaisutahna

SÄILYTÄ JÄÄKAAPISSA

Opalescence Go-pienoispakkaukset



Maku	6%
Mint	4644
Melon	3599

Pakkaus sisältää 4 läpipainopakkausta, jossa on 1 lusikka ylähampaille ja 1 lusikka alahampaille

SÄILYTÄ JÄÄKAAPISSA

Opalescence Go-pienoispakkaukset 12 kpl/pakkaus



Maku	6%
Mint	4649
Melon	3600

4 kpl ylä-/alaleuan lusikkaa kussakin pakkauksessa

Toimenpide

Lue tuotteen mukana toimitettavat ohjeet ja varoitukset huolellisesti ennen käyttöä.



Ota tuote pakkauksesta.
"U" – Lusikka ylähampaisiin
"L" – Lusikka alahampaisiin



Aseta ylähampaiden lusikka hampaiden päälle.



Pure hampaita tiiviisti yhteen, ja ime lusikkaa 2 sekuntia.



Poista värillinen ulompi lusikka. Valkoinen sisälusikka jää paikalleen hampaiden päälle. Toimi samoin alahampaiden lusikan suhteen.



Poista valkaisulusikat määrätyn käyttöajan kuluttua, ja harjaa hampaat.