
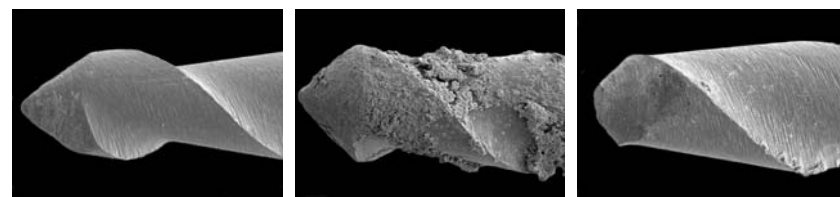
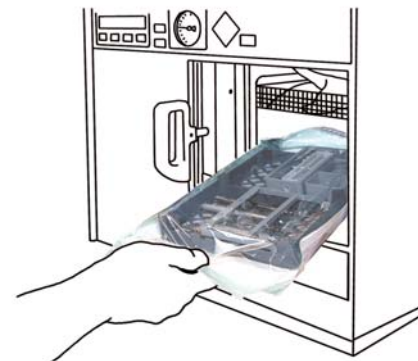


Vähentää merkittävästi infektioriskiä ja pitää työvälineesi puhtaina ja steriileinä

- vähemmän tavaraa tarjottimella
- suuret reiät pohjassa
- instrumentit, neulat ja porat ovat esillä väljästi mutta samalla turvallisesti omalla paikallaan

Kaikkii tämä takaa erinomaisen veden ja höyryn penetraation.

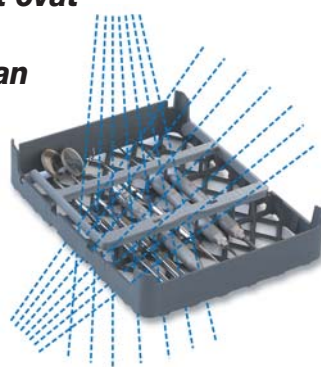

Uusi juurikanavaneula

Käytetty juurikanavaneula


PractiPal:issa turvallisesti puhdistettu juurikanavaneula

(SEM-kuvat, Karolinska University Hospital, Tukholma.)

Säästää aikaa vastaanotolla



- tarjotin valmiina toimenpidettä varten
- vähemmän töitä puhdistettaessa, koska instrumentit pysyvät turvallisesti paikoillaan tarjottimella

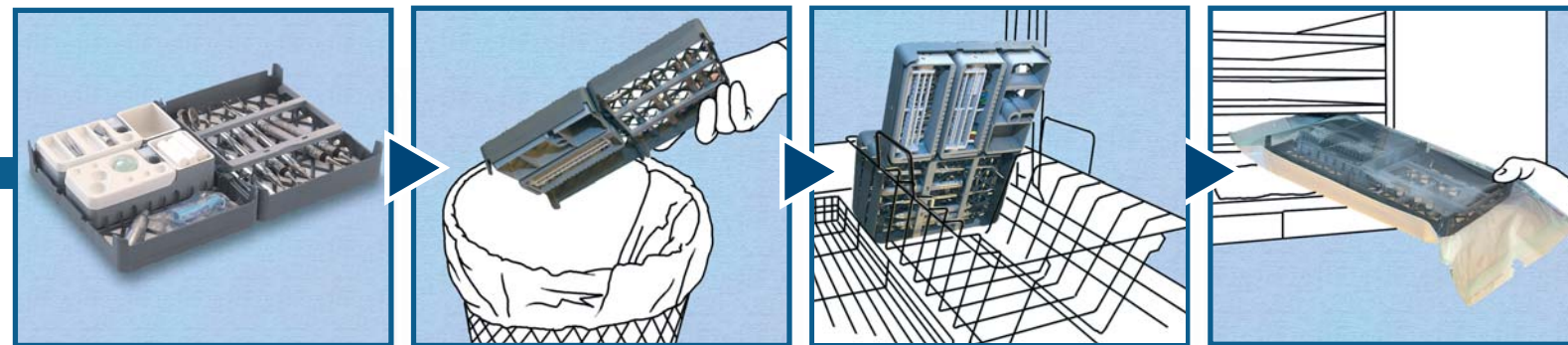

Organisoi työn kulkua hoitotilanteesta säilytykseen.

Rationalisoi instrumenttiesi käyttöä ja säilytystä

- käytännölliset moduulit porille, neuloille ja käsi-instrumenteille
- osat mukautuvat helposti monenlaisiin toimenpiteisiin ja käyttötarkoituksiin



Proteettiseen hoitoon



Hygienistille



Kiillotukseen



Juurihoitoon



Juurikanavanouloille

Tekee työskentelystäsi turvallisempaa

- tarjottimen korkeat reunat suojaavat teräviltä instrumenteilta.
- varmasti paikoillaan pysyvät neulat ja porat vähentävät vahinkojen syntymisriskiä.




PRACTIPAL™ CLAMP TRAY

- Yksiköitä voidaan yhdistää toisiinsa suuremmiksi kokonaisuuksiksi.
- Perustarjottimeen ja kanteen mahtuu kaksi yksikköä.
- Jokaiseen yksikköön mahtuu 9 instrumenttia, jotka ovat max. halkaisijaltaan 12 mm ja pituudeltaan 172 mm.
- Paikoilleen asetetut instrumentit on sijoitettu riittävän väijästä, jolloin vältetään hankauksesta syntyvät vauriot.



PRACTIPAL™ BUR/ENDO STAND

- 16 poraa, riittää perustoimempiteisiin. (8 FG, 4 HP/RA pitkä, 4 HP/RA lyhyt/4 FG pitkä)
- 29 neulaa - koko sarja
- Neulamitta ja mittarenkaan asetin.
- Neulat ja porat on helppo asettaa takaisin paikoilleen.
- Neulat ja porat on helppo valita.
- Vahinkoriski vähenee.

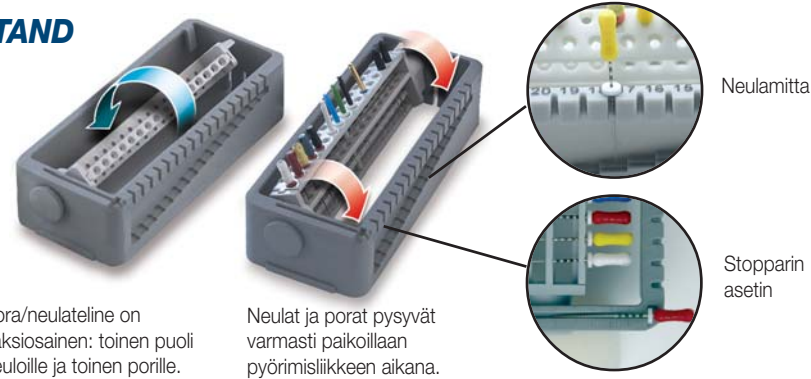

Pora/neulateline on kaksiosainen: toinen puoli neuloille ja toinen porille.

Neulat ja porat pysyvät varmasti paikoillaan pyörimisliikkeen aikana.

PRACTIPAL™ MULTIBLOCK

MultiBlock

Käytetään alla kuvatuille kertakäyttöisille välineille.



Foam

Ainutlaatuinen ura, joka irrottaa viilausjäänteet neuloista ja instrumenteista.

Multi Dish Pallet

Erikokoiset syvennykset soveltuvat erilaisiin toimenpiteisiin.



Point Pallet

Ainutlaatuinen yhdistelmä juurihoidossa käytettäviä lääkekuppeja ja annostelumaljoja.



Waste Container

Voidaan käyttää roskille ja käsi-instrumenttien raaputuksesta syntyville jäänteille ja lisäksi lääkkeiden annostelumaljana tai vanupallo- ja sideharsotupposäiliönä.

Needle recapper


Paikka neulan suojahylsulle. Ei neulanpistoriskiä suojahylsytä takaisin laitettaessa.

Tarjotin	Lasikuituvahvistettu PPS	☒	☒
Klipsit	Polyamidi	☒	☒
Klemmari	Lasikuituvahvistettu polyamidi	☒	☒
Pora/Endoteline	Polyamidi	☒	☒
Multi Block	Polyamidi	☒	☒
Multi DishPallet*	Polypropyleeni	☒	☒
Point Pallet*	Polypropyleeni	☒	☒
Waste Container*	Polypropyleeni	☒	☒
Foam*		☒	☒

*) Kertakäyttöisiä, mutta voidaan autoklavoida kerran.

Kaikki osat on valmistettu kestävästä muovista, joka ei korrodoitu eikä absorboi lämpöä puhdistuksen aikana.

PRACTIPAL™ TRAYS

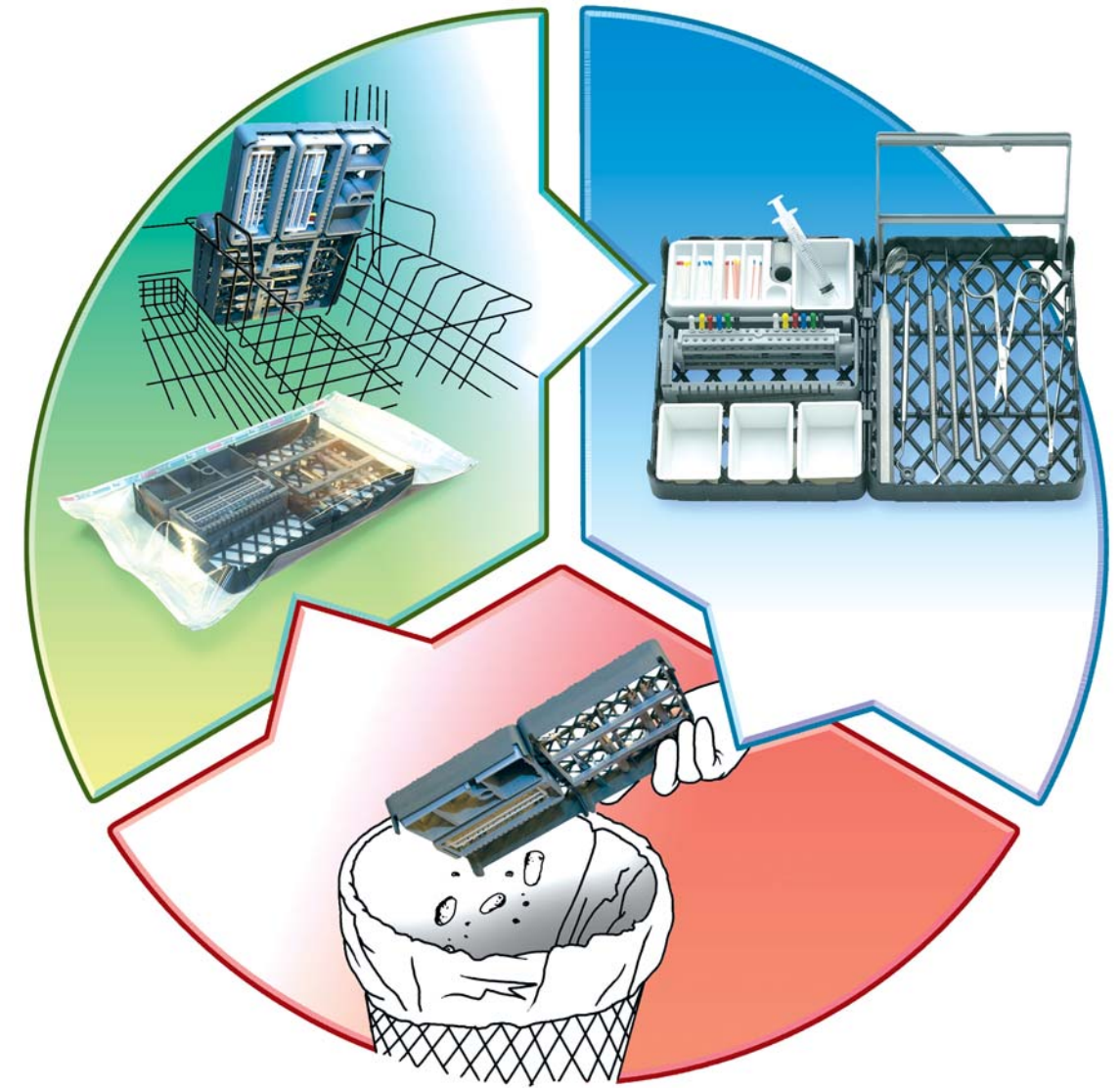

DIRECTA
Design by Dentists

DIRECTA AB
P.O. Box 723, SE-194 27 Upplands Väsby, Sweden
Tel +46 8 506 505 75 Fax +46 8 590 306 30
info@directadental.com
www.directadental.com

DIRECTA
Design by Dentists

ORIOLA
Hammasväline

PRACTIPAL™ TRAYS