


PRACTIPAL™ CLAMP TRAY

- Yksiköitä voidaan yhdistää toisiinsa suuremmiksi kokonaisuuksiksi.
- Perustarjotteeseen ja kanteen mahtuu kaksi yksikköä.
- Jokaiseen yksikköön mahtuu 9 instrumenttia, jotka ovat max. halkaisijaltaan 12 mm ja pituudeltaan 172 mm.
- Paikoilleen asetetut instrumentit on sijoitettu riittävän väljästi, jolloin vältetään hankauksesta syntyvät vauriot.



PRACTIPAL™ BUR/ENDO STAND

- 16 poraa, riittää perustoimimpeiteisiin. (8 FG, 4 HP/RA pitkä, 4 HP/RA lyhyt/4 FG pitkä)
- 29 neulaa - koko sarja
- Neulamitta ja mittarenkaan asetin.
- Neulat ja porat on helppo asettaa takaisin paikoilleen.
- Neulat ja porat on helppo valita.
- Vahinkoriski vähenee.

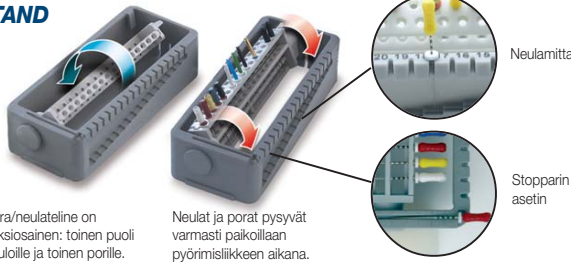

Pora/neulateline on kaksiosainen: toinen puoli neuloille ja toinen porille.

Neulat ja porat pysyvät varmasti paikoillaan pyörimisliikkeen aikana.

PRACTIPAL™ MULTIBLOCK


MultiBlock

Käytetään alla kuvatuille kertakäyttöisille välineille.



Multi Dish Pallet

Erikokoiset syvennykset soveltuvat erilaisiin toimenpiteisiin.

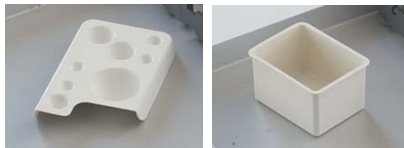

Point Pallet

Ainutlaatuinen yhdistelmä juurihoidossa käytettäviä lääkekuppeja ja annostelumaljoja.



Foam

Ainutlaatuinen ura, joka irrottaa viilauksijäänteet neuloista ja instrumenteista.

Waste Container

Voidaan käyttää roskille ja käsi-instrumenttien raaputuksesta syntyville jäätelle ja lisäksi lääkkeiden annostelumaljana tai vanupallo- ja sideharsotoppusäiliönä.

Needle recapper


Paikka neulan suojajähylsille. Ei neulanpistoriskiä suojajähylsyt takaisin laitettaessa.

Tarjotin	Lasikuituvahvistettu PPS	☑	☑
Klipsit	Polyamidi	☑	☑
Klemmari	Lasikuituvahvistettu polyamidi	☑	☑
Pora/Endoteline	Polyamidi	☑	☑
Multi Block	Polyamidi	☑	☑
Multi DishPallet*	Polypropyleeni	☑	☑
Point Pallet*	Polypropyleeni	☑	☑
Waste Container*	Polypropyleeni	☑	☑
Foam*		☑	☑

*) Kertakäyttöisiä, mutta voidaan autokleivoita kerran.

Kaikki osat on valmistettu kestävästä muovista, joka ei korrodoitu eikä absorboi lämpöä puhdistuksen aikana.

PRACTIPAL™ TRAYS

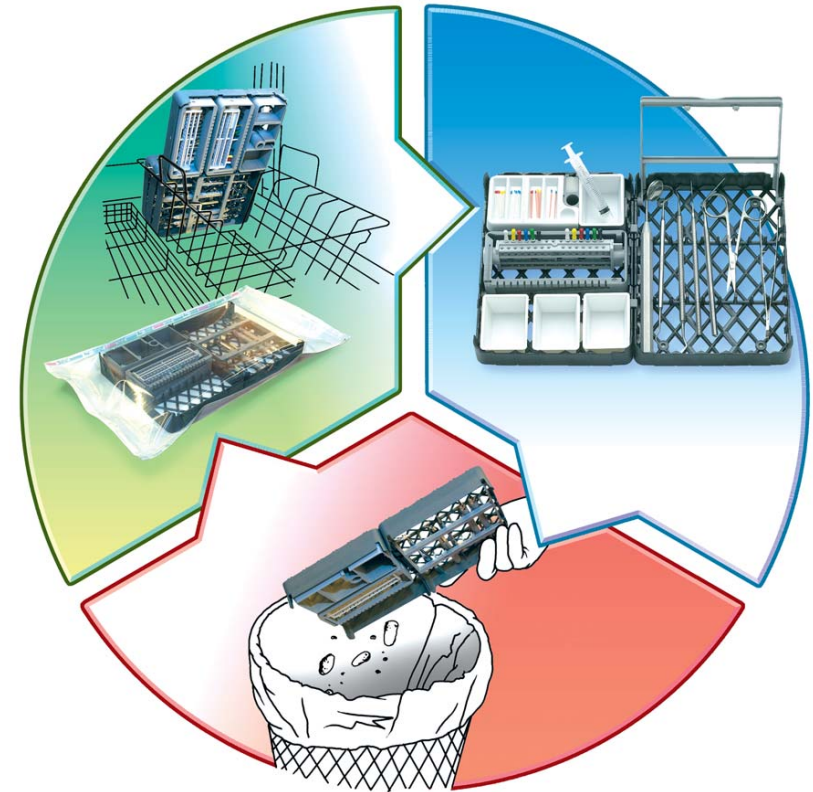

DIRECTA AB
P.O. Box 723, SE-194 27 Upplands Väsby, Sweden
Tel +46 8 506 505 75 Fax +46 8 590 306 30
info@directadental.com
www.directadental.com



HAMMASVÄLINE




Hammastarvikemyynti, p. 010 588 6100
PL 15, 02101 Espoo | www.hammasvaline.fi



Vähentää merkittävästi infektoriskiä ja pitää työvälineesi puhtaina ja steriileinä

- vähemmän tavaraa tarjottimella
- suuret reiät pohjassa
- instrumentit, neulat ja porat ovat esillä väljästi mutta samalla turvallisesti omalla paikallaan

Kaikkii tämä takaa erinomaisen veden ja höyryn penetraation.

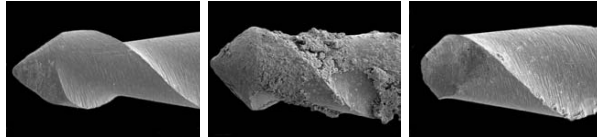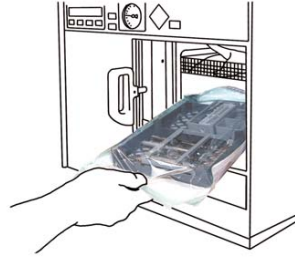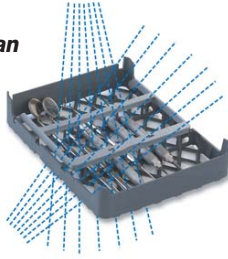


Uusi juurikanavaneula

Käytetty juurikanavaneula


PractiPal:ssa turvallisesti puhdistettu juurikanavaneula

(SEM-kuvat, Karolinska University Hospital, Tukholma.)

Säästää aikaa vastaanotolla

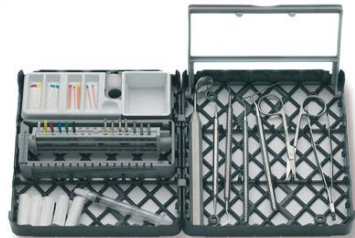

- tarjotin valmiina toimenpidettä varten
- vähemmän töitä puhdistettaessa, koska instrumentit pysyvät turvallisesti paikoillaan tarjottimella

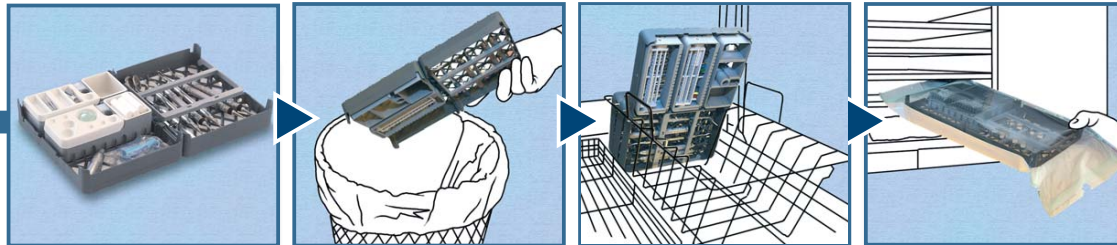

Organisoi työn kulkua hoitotilanteesta säilytykseen.

Rationalisoi instrumenttiesi käyttöä ja säilytystä

- käytännölliset moduulit porille, neuloille ja käsi-instrumenteille
- osat mukautuvat helposti monenlaisiin toimenpiteisiin ja käyttötarkoituksiin



Proteettiseen hoitoon



Hygienistille



Kiillotukseen



Juurihoitoon



Juurikanavanouloille

Tekee työskentelystäsi turvallisempaa

- tarjottimen korkeat reunat suojaavat teräviltä instrumenteilta.
- varmasti paikoillaan pysyvät neulat ja porat vähentävät vahinkojen syntymisriskiä.

