

# UNIVERSAL DENTIN SEALANT

Juurenpinnan sensitiivisyyteen



Black Mini -kärki

## AINUTLAATUISET EDUT

- Nopea annostelu – levitä harjalla ja kuivaa
- Sopii mainiosti suuhygienistin "työkalupakkiin"
- Ihanteellinen hammaskiven poiston ja juurenpinnan tasoituksen jälkeen

## KLIININEN MERKITYS JA KÄYTTÖ

UNIVERSAL DENTIN SEALANT on bioyhteensopiva, ei-polymeeroituva, suurimolekyylipainoinen resiini helposti haihtuvassa orgaanisessa liuottimessa. Käytetään sensitiivisten juurenpintojen peittämiseen tubulusten sulkemiseksi ja epämukavuuden vähentämiseksi juurenpinnan tasoituksen ja runsaan hammaskivenpoiston jälkeen. Lähes läpäisemätön suoja säilyy useita kuukausia applikoinnin jälkeen.


## PAKKAUSKOOT

### UNIVERSAL DENTIN SEALANT -täyttöpakkaus

Tuotenro 34560 | Valm. koodi 266

4 kpl Universal Dentin Sealant -ruiskuja, 1,2 ml

Säilyvyysaika: 30 kk

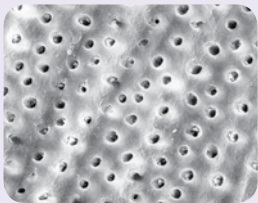

Ultradent Universal Dentin Sealant peittää dentiinin suojaavalla pinnoitteella. Kumpaakin pintaa on etsattu fosforihapolla 20 sekuntia; elektronimikroskooppikuvassa oikealla pinta on ensin pinnoitettu Universal Dentin Sealantilla.

Universal-dentiinisuoja-aine EI ole sidosaine. Katso myös osio amalgaamin sidostamisesta. Jos alustäytettä tai laineria tarvitaan, käytä Ultra-Blend Plusssaa.