



# Luja perusta

everX Flow<sup>TM</sup>  
GC:ltä

Katkokuituvahvisteinen  
juokseva yhdistelmämuovi  
dentiinin korvaamiseen

**GC**



# everX Flow GC:ltä

## Luja perusta


Tutustu katkokuituvahvisteiseen juoksevaan yhdistelmämuoviin **everX Flow**, joka on tarkoitettu **dentiinin korvaamiseen ja täytteiden vahvistamiseen**. Samalla tavoin kuin teräsvahvisteista betonia käytetään rakennustöissä, everX Flow -materiaalin lasikuidut vahvistavat hammastäytteitä ja **estävät niitä halkeilemasta**.

Koska everX Flow on helppokäyttöinen, uskomattoman luja ja saatavilla kahdessa eri värisävyssä, siitä tulee **uusi suosikkisi pilarin rakentamisessa ja kaikissa täytteissä, joissa tarvitaan lujaa perustaa**.



## Parempi murtolujuus takaa **kestävät** laajat täytteet

Useimpien yhdistelmämuovien ominaisuudet sopivat erinomaisesti kiilteen korvaamiseen, sillä ne kestävät kulutusta ja ovat hyvin esteettisiä. Ne eivät kuitenkaan pysty vastustamaan murtumia samalla tavoin kuin dentiini. everX Flow sen sijaan pystyy, sillä sen murtolujuus on erinomainen. **Materiaalissa on suuri määrä lujasti resiniinimatriisiin sitoutuneita lyhyitä kuituja, joiden ansiosta murtolujuus on lähellä dentiinin murtolujuutta**. Näin materiaali **vahvistaa tehokkaasti isoja taka-alueen täytteitä** tavallisen yhdistelmämuovin toimiessa kiillekerroksena.

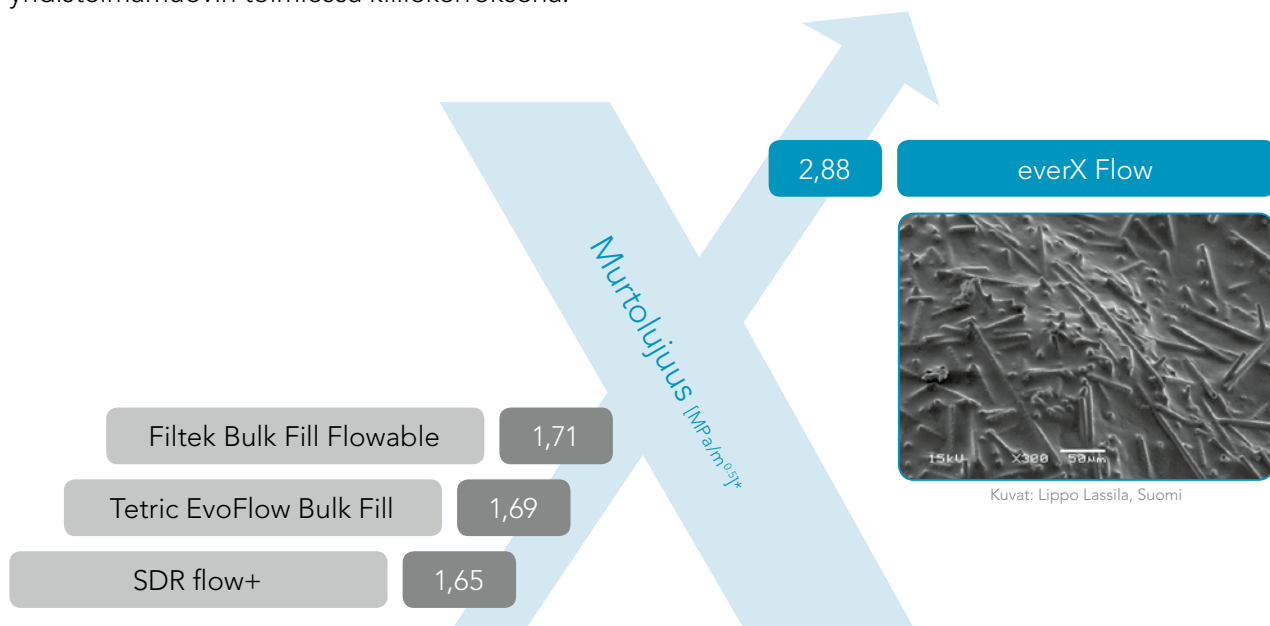

\* Lähde: GCC R&D – Talletettua tietoa.  
Testi suoritettu ASTM E399-90 (1997) -standardin mukaisesti.


# Täydellisen tiksotrooppinen everX Flow™ on helppo levittää ja mukautuu



Kuvat:  
Javier Tapia Guadix, Espanja

Ihanteellisen tiksotrooppisuutensa ansiosta everX Flow **mukautuu helposti kaikkiin preparaateihin ja auttaa lisäämään tiiviyyttä.**

Koska materiaalin juoksevuus on hallittavissa, sitä voi levittää myös ylämolaareihin **ilman valumista.**

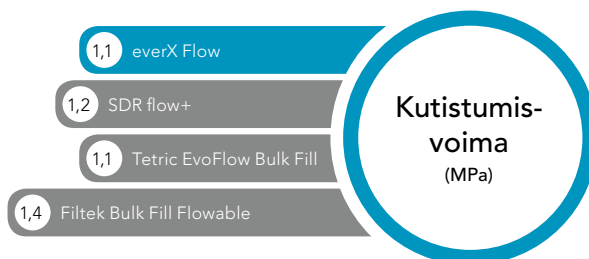

Lähde: GCC R&D – Talletettua tietoa.

## Kaksi värisävyä täyttää kaikki tarpeesi

### Bulk

Kovetusvyvyys  
5,5 mm

Ihanteellinen **syviin taka-alueen kaviteetteihin**

### Dentin

Kovetusvyvyys  
2,0 mm

Ihanteellinen **esteettisempiin täytteisiin ja pilarin rakentamiseen**

## Ihanteellinen isojen kaviteettien vahvistamiseen ja pitkäkestoisiin esteettisiin täytteisiin



Kaviteetin preparointi



everX Flow -materiaalin  
applikointi (Väri: Dentin)



Viimeinen kerros **Essentia-**  
materiaalilla (Väri: Universal)



Postoperatiivinen tilanne

Kuvat: Georg Benjamin,  
Saksa



Kaviteetin preparointi



everX Flow -materiaalin  
applikointi (Väri: Bulk)



Viimeinen kerros **G-aenial Universal  
Injectable** -materiaalilla (Väri: A3)



Postoperatiivinen tilanne

Kuvat: Lucile Dahhan,  
Ranska

# everX Flow GC:ltä

## Luja perusta



**Bulk-väri**  
syviin  
kaviteetteihin

**Dentin-  
väri**  
erittäin  
esteettisiin  
töihin



Preparoi kaviteetti



Jos kyseessä on luokan II kaviteetti,  
rakenna puuttuvat seinämät  
tavallisella yhdistelmämuovilla



Täytä kaviteetti everX Flow  
-materiaalilla



Lopputuloks, kun työ on päällystetty  
tavallisella yhdistelmämuovilla

### everX Flow

|        |                                        |
|--------|----------------------------------------|
| 012898 | everX Flow, ruisku 2 ml (3,7 g) Bulk   |
| 012899 | everX Flow, ruisku 2 ml (3,7 g) Dentin |

## Tutustu myös



G-Premio BOND  
Universaali sidosaine



G-aenial Universal Injectable  
Erikoisluja injektoitava yhdistelmämuovi



Essentia Universal  
Universaali pastamainen  
yhdistelmämuovi

everX Flow, Essentia, G-Premio BOND ja G-aenial Universal Injectable ovat GC:n tavaramerkkejä.  
Filtek Bulk Fill Flowable, SDR flow+ ja Tetric EvoFlow Bulk Fill eivät ole GC:n tavaramerkkejä.

**GC EUROPE N.V.**  
Head Office  
Researchpark  
Haasrode-Leuven 1240  
Interleuvenlaan 33  
B-3001 Leuven  
Tel. +32.16.74.10.00  
Fax. +32.16.40.48.32  
info.gce@gc.dental  
<http://www.gceurope.com>

**GC NORDIC AB**  
Finnish Branch  
Bertel Jungin aukio 5 (6. kerros)  
FIN-02600 Espoo  
Tel: +358 40 9000 757  
info.finland@gc.dental  
<http://finland.gceurope.com>  
<http://www.gceurope.com>

