



# Se yksi ja ainoa

Luotettava

Universaali

Esteettinen

Tekniikasta  
riippumaton

Yksinkertainen

## G-CEM ONE™

Itsekiinnittyvä  
muovisementti

**GC**




Since 1921  
100 years of Quality in Dental

# G-CEM ONE... tekee kaikesta helpompaa!

G-CEM ONE on aidosti **universaali sementti**, joka **ei ole sensitiivinen** valitun tekniikan suhteen. Materiaalilla on erinomainen kemiallinen kovettuminen ja **korkea sidoslujuus**. Se tekee **kaikista sementointitoimenpiteistä** helpompia ja tuottaa **ennustettavampia tuloksia** ja mielenrauhaa. G-CEM ONE sopii **GC Touch Cure** -ominaisuutensa ansiosta **monenlaisiin käyttöindikaatioihin**, myös haastaviin klinisiin tapauksiin.

## One GC Touch Cure

**G-CEM ONE Adhesive Enhancing Primer -aineen** sisältämä kemiallinen initiaattori kiihdyttää sementin kemiallista kovettumista hampaan pinnasta päin ja takaa sidoksen vakauden.

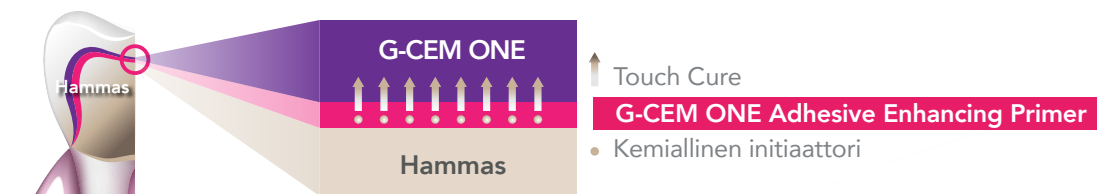


## Luotettava

Ihanteellinen sidoslujuus retentiivisissä ja ei-retentiivisissä töissä<sup>1</sup>  
**valinnaisen**, adheesiota edistävän **G-CEM ONE Adhesive Enhancing Primer** -aineen ainutlaatuisen **GC Touch Cure** -ominaisuuden ansiosta.

## Tekniikasta riippumaton

Tehostettu kemiallinen kovettuminen antaa mielenrauhaa  
Ylimäärät on helppo poistaa ja puhdistaa lyhyen esikovuksen avulla  
Kosteuden- ja syljenkestävä<sup>1</sup>  
Ihanteellinen pastan juoksevuus  
Toimenpiteen jälkeen ei esiinny juuri lainkaan sensitiivisyyttä<sup>1</sup>

## Tehostettu itsekovettuvuus

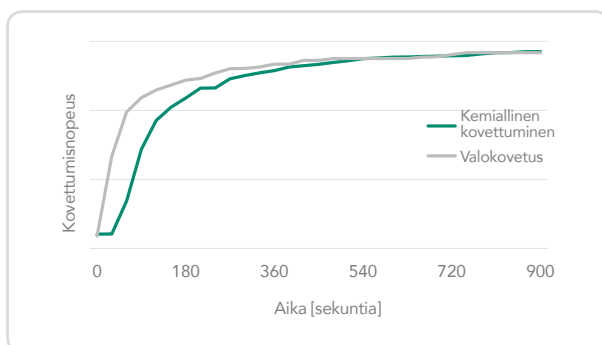

Lähde:  
Prof. Miyazaki, Nihonin yliopisto, Japani

<sup>1</sup> Yhdessä adheesiota edistävän G-CEM ONE Adhesive Enhancing Primer -aineen kanssa

<sup>2</sup> Yhdessä G-Multi PRIMER -aineen kanssa

<sup>3</sup> Kentän mielipidekyselyn tulos. Käytetty pelkästään G-CEM ONE -sementtiä. Tallennettua tietoa.



# G-CEM ONE... tekee kaikesta helpompaa!

Valinnainen, adheesiota edistävä G-CEM ONE Adhesive Enhancing Primer

Kaikkiin tukihampaisiin ja kaviteetteihin

- MDP: sidostus hammasrakenteeseen, zirkoniumoksidiin ja epäjaloihin metalleihin
- 4-MET: sidostus hammasrakenteeseen
- MDTP: sidostus jalometalliin
- Kiihdyttäjä ⇒ luja sidostuminen tukihampaaseen ja kaviteettiin  
**GC Touch Cure** -ominaisuuden ansiosta.



Ei valokovetusta, pelkkä kuivaus.

Odota 10 sekuntia

Voimakas paineilma 5 sekuntia

## Universaali

Erinomainen sidoslujuus hampaaseen ja kaikkiin materiaaleihin:

Kiille, dentiini, zirkoniumoksidi, metalli, lasikeramia<sup>2</sup>, hybridikeramia<sup>2</sup>.

## Esteettinen

Näkymätön, kulutusta kestävä sauma takaa esteettisen lopputuloksen.

## Yksinkertainen

Vähäisen tuotemäärän ansiosta työskentely sujuu toistettavasti ja optimaalisesti.

Suorituskykyä läpikuultavuudesta riippumatta



Metalli

Kuvat: Hammaslääkäri Kazunori Otani, Japani




Litiumdisilikaatti


Kuvat: Hammaslääkäri Akimasa Tsujimoto, Japani

# G-CEM ONE... aina luotettava!

Yksi sementti tarjoaa parhaan sidoslajuuden kaikilla alustoilla

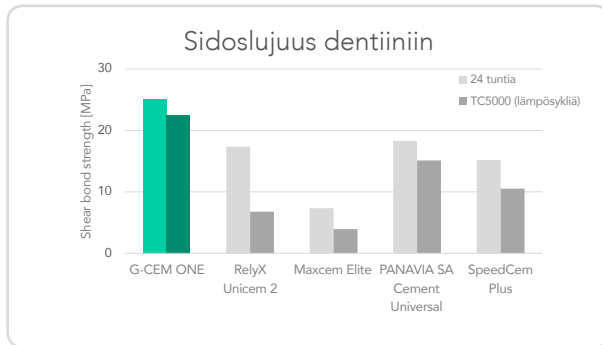


Lähde: GC R&D, tallennettua tietoa.

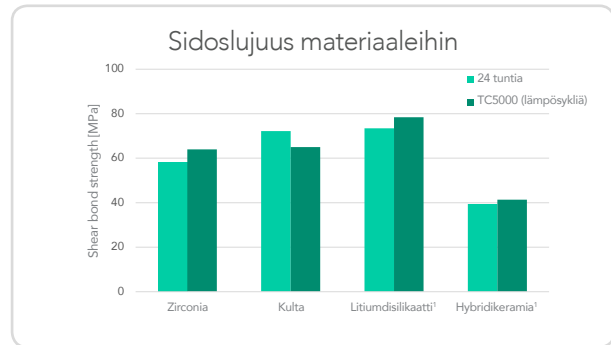


Lähde: GC R&D, tallennettua tietoa.  
<sup>1</sup> G-Multi PRIMER -aineen kanssa

Yksi primeri kaikkiin kliinisiin haasteisiin

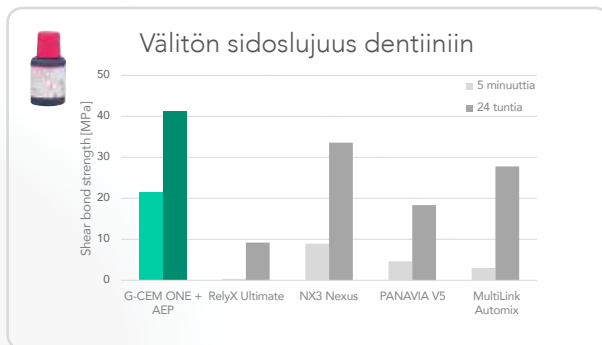

Lähde: GC R&D, tallennettua tietoa.

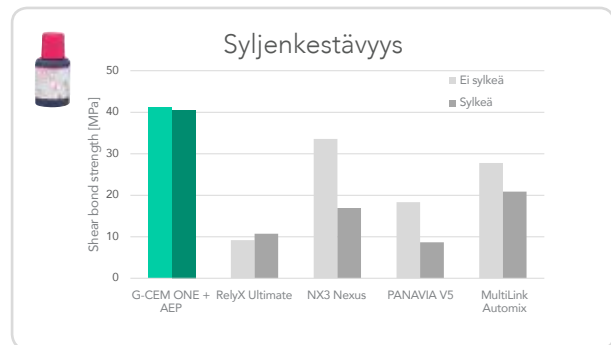


Lähde: GC R&D, tallennettua tietoa.

Välitön sidoslajuus, jotta vältytään varhaiselta irtoamiselta ei-retentiivisissä tapauksissa sekä CAD/CAM-jyrsityissä kruunuissa.

G-CEM ONE Adhesive Enhancing Primer takaa erinomaisen sidoslajuuden, myös silloin, kun mukana on jonkin verran sylkeä.

Näkymätön sauma takaa kauniin lopputuloksen

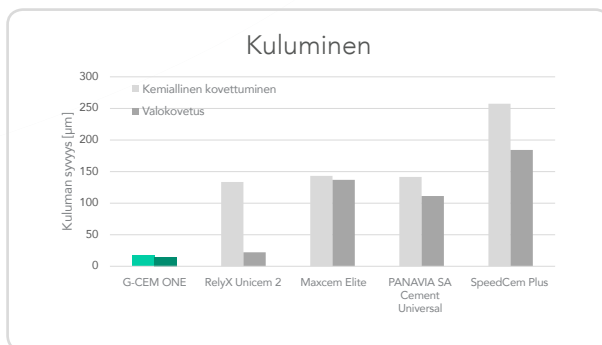

Lähde: GC R&D, tallennettua tietoa.



Ennen hoitoa



Kuuden kuukauden kuluttua

Kuvat: Hammaslääkäri Masayuki Okawa, Japani

Ohut kerrospaksuus (5 µm) ja korkea kulutuskestävyys mahdollistavat näkymättömän sementtisauman.



Vaihtoehtoisen G-CEM ONE Adhesive Enhancing Primer -aineen kanssa.

# G-CEM ONE... paras kliininen kumppani!

## Optimoitu juoksevuus



## Ylimäärien poisto helposti yhdessä vaiheessa yhden sekunnin esikovetuksella



Kuvat: Hammaslääkäri Kazunori Otani, Japani

## Yksi tuote kaikkiin kliinisiin tilanteisiin

### Taka-alueen kruunu (zirkoniumoksidi)



Preparoitu hammas puhdistettu ja kuivattu.



Työ sementoitu.



Lopputullos.

Kuvat: Hammaslääkäri Kazunori Otani, Japani



### Etualueen kruunu (litiumdisilikaatti)



Preparoitu hammas puhdistettu ja kuivattu.



G-CEM ONE Adhesive Enhancing Primer -aineen levitys.



Lopputullos.

Kuvat: Hammaslääkäri Kazunori Otani, Japani



### Taka-alueen onlay-täyte (litiumdisilikaatti)



Aloitustilanne.



Työ sementoitu G-CEM ONE Adhesive Enhancing Primer -ainetta käyttäen.



Lopputullos.

Kuvat: Hammaslääkäri Riccardo Tempista, Italia



Vaihtoehtoisen G-CEM ONE Adhesive Enhancing Primer -aineen kanssa.

# Pakkaukset

## Tuotenro

|          |                                      |
|----------|--------------------------------------|
| 10006918 | G-CEM ONE Starter Kit A2             |
| 10006919 | G-CEM ONE Starter Kit Translucent    |
| 10006920 | G-CEM ONE System Kit                 |
| 10006921 | G-CEM ONE Twin Refill A2             |
| 10006922 | G-CEM ONE Twin Refill Translucent    |
| 10006923 | G-CEM ONE Single Refill AO3          |
| 10006924 | G-CEM ONE Single Refill White Opaque |
| 10006925 | G-CEM ONE Value Refill A2            |
| 10006926 | G-CEM ONE Value Refill Translucent   |
| 10006833 | G-CEM ONE Adhesive Enhancing Primer  |

## Kuvaus



G-CEM ONE System Kit




G-CEM ONE Starter Kit



G-CEM ONE Adhesive Enhancing Primer

## Värit

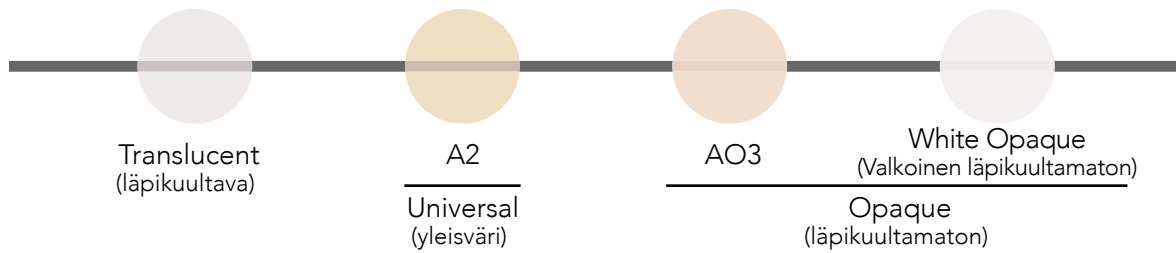

## Samankaltaisia tuotteita



**G-Multi PRIMER**  
Universaali primeri



**D-Light® Pro**  
Kahden aallon-  
pituuden LED-  
valokovettaja



**FREEGENOL**  
Väliaikainen  
sementti

G-Multi PRIMER, D-Light® Pro ja FREEGENOL ovat GC:n tavaramerkkejä.

RelyX Unicem, RelyX Ultime, Maxcem Elite, PANAVIA SA Cement Universal, PANAVIA V5, SpeedCem Plus, NX3 Nexus ja Multilink Automix eivät ole GC:n tavaramerkkejä.

### GC EUROPE N.V.

Head Office  
Researchpark,  
Haasrode-Leuven 1240  
Interleuvenlaan 33, B-3001 Leuven  
Tel. +32.16.74.10.00  
Fax. +32.16.40.48.32  
info.gce@gc.dental  
<http://europe.gc.dental>

### GC NORDIC AB

Finnish Branch  
Lemminkäisenkatu 46  
FIN-20520 Turku  
Tel. +358.40.900.07.57  
info.finland@gc.dental  
<https://europe.gc.dental/fi-FI>

