

HEKA S⁺

Pohjoismaista suunnittelua - sinua varten





Suunniteltu Tanskassa
Kehitetty huolellisesti sinua varten

Heka S⁺ Black Edition mustilla lasipinnoilla.



Heka S⁺ - tarpeisiisi suunniteltu

Hammashoitoyksiköiden suunnittelu ja valmistus on meille ensiarvoisen tärkeää. Olemme hammashoitokoneiden asiantuntijoita - se on työtämme ja olemme siitä ylpeitä. Suhtaudumme nöyrästi siihen, kuinka keskeisessä roolissa laitteemme hammaslääkärin vastaanotoilla ovat.

Pyrimme luomaan turvallisuutta ja mukavuutta sinulle, tiimillesi ja potilaillesi. Tämä näkyy suunnittelussamme, jossa pyrimme häivyttämään laitteiston kliinistä puolta luomalla tyylikkäitä kalusteita. Heka S⁺ puhtaine linjoinen ja integroidulla näytöllä varustettuine lasipintoineen on tästä selkeä esimerkki.

Jokainen Heka-hoitoyksikkö valmistetaan yksilöllisesti vastaamaan sinun ja tiimisi yksilöllisiin mieltymyksiin ja vaatimuksiin. Tämä luo optimaaliset mahdollisuudet yksinkertaiseen ja ergonomiseen työskentelyyn, jossa Heka S⁺ ohjaa sinut toimenpiteiden läpi automaattisesti ja yksilöllisesti. Heka S⁺ vie myös vähemmän tilaa, mikä tuo enemmän vapautta ja mahdollisuuksia suunnitella vastaanottohuone haluamallasi tavalla. Myös yritys hyöttyy, sillä useampi hammashoitoyksikkö mahtuu pienempiin neliöihin.

Työtyytyväisyyttä jokaiseen päivään - sukupolvien ajan



Sukupolvesta toiseen – olemme ylpeitä nähdessämme, että myös uudet sukupolvet valitsevat Heka-laitteiston. Tämä on mahdollista, koska päivitämme hammashoitoyksiköitä jatkuvasti ja tuomme niihin uusia lisävarusteita ja instrumentteja. Näin varmistamme, että hyödyt uusimmista kehityssuunnista ja käytössäsi on parhaat ominaisuudet ja korkeimman standardin laitteet sekä päivitetty, vuosikautia kestävä hammashoitoyksikkö. Tuotteillemme on ominaista pitkä käyttöikä, joka tukee myös pyrkimyksiämme vähentää ympäristövaikutuksia.

Pidämme kovasti työstämme ja pyrimme aina tarjoamaan asiakkaillemme parhaan mahdollisen tuotteen. Olemme paneutuneet huolellisesti Heka S*:n jokaiseen yksityiskohtaan, koska tiedämme, että haluat nauttia siitä vuosien ajan. Tarjotin ja konsolin yläosa on esimerkiksi valmistettu CNC-työstetystä alumiinikappaleesta, johon on kiinnitetty lasilevy. Tämä takaa hygieenisimmän käytettävissä olevan pinnan ja mahdollistaa samalla näytön ja näppäinten integroinnin. Tämä ei ole helpoin ratkaisu, mutta uskomme sen olevan olennainen osa yleistä käyttökokemusta ja takaavan korkean laadun.





Heka S+ tarjoaa parhaat ergonomiset työskentelyolosuhteet

Kaikki on siellä missä pitääkin - järkevästi sijoiteltuna

Heka S+ on varustettu useilla ohjelmoitavilla yksilöllisillä asetuksilla, jotka tukevat työpäivän aikana tekemiäsi erilaisia hoitotoimenpiteitä ja prosesseja, ja mahdollistavat niiden toteuttamisen yksinkertaisesti ja mahdollisimman vaivattomasti. Hoitotilannetta ei tarvitse keskeyttää, vaan voit helposti vaihtaa haluamaasi asetukseen jalkaohjaimella, jolloin huomiosi säilyy kaiken aikaa hoidossa ja potilaan suussa.

Jotkut yhdistävät hammashoitoyksikön ja potilastuolin yhteen kytketyksi hammashoitoyksiköksi. Haittapuolena on kuitenkin se, ettei silloin voi vapaasti suunnitella vastaanottoalaa ja sijoittaa hammashoitoyksikköä ja potilastuolia vapaasti erilleen.

Heka S+ on ratkaisu, jossa hammashoitoyksikköä ja potilastuolia ei ole kytketty yhteen. Sinulla on täysi vapaus suunnitella juuri omiin tarpeisiisi sopiva työtila ilman kompromisseja. Kun potilaan ympärille jää 180 asteen työtila, olemme varmoja siitä, että sinä ja tiimisi arvostatte Heka S+:n tuomaa vapautta päivittäisessä työssänne. Pienellä yksityiskohdalla on suuri merkitys.



Tarjottimen kapea muotoilu mahdollistaa ergonomiset työasennot potilaan ympärillä, jolloin kyynärpäitä tai hartioita ei tarvitse tarpeettomasti kohottaa.



Heka ID tuo täysin uudenlaisia, joustavia vaihtoehtoja

Kun kehitämme tuotteitamme, pidämme mielessämme aina asiakkaan tarpeet. Heka ID -kortin avulla voit tallentaa työnkulun, johon olet tottunut, ilman että siihen on erikseen kiinnitettävä huomiota. Jos vastaanotollasi on useita huoneita, joissa työskentelee useita hammaslääkäreitä tai joissa tehdään erilaisia toimenpiteitä, Heka ID -kortti on älykäs ratkaisu.

Olemme asettaneet lukijan instrumenttisillan keskelle, minkä ansiosta kortin käyttö on sinulle ja hoitajallesi helppoa. Heka ID -korttiin voi tallentaa useita eri hoitoja, joten asetukset on helppo vaihtaa tiettyyn hoitoon sopiviksi.



Tasapainojousitus on keskeinen osa ergonomista työnkulkua. Kukin instrumentti on kalibroitu erikseen, ja jousi neutraloi tarkasti potilaan suussa olevan instrumentin painon vetämättä kuitenkaan instrumenttia taaksepäin.

Heka S* kannattelee instrumenttia ja antaa sinun liikkua vapaasti, jonka ansiosta voit työskennellä erittäin tarkasti rasittamatta rannettasi ja kyynärvarttasi.


Saamamme palautteen perusteella tuotteemme luovat ergonomisesti käytännöllisen ratkaisun, koska hammashoitoyksikkömme on helppo mukauttaa ja se tukee monia eri työasentoja kiireisen työpäivän aikana - ja usein ilman, että sinun tarvitsee edes ajatella asiaa.



Keskitetty huomio potilaassa

Meille kaikille on tuttu tilanne, jossa haluamme keskittyä potilaan suuhun, mutta usein on pakko vilkaista hoidon aikana instrumentin asetuksia, vaikkapa vain vesisuihkun tietoja. Heka S* heijastaa vesisuihkun esivalinnan potilaan suojapaperiin, jolloin näet asetuksen näkökentän laidalla. Tämä vähentää merkittävästi niskaan ja silmiin kohdistuvaa rasitusta.

Heka S*:ssa kaikki instrumenttitiedot on sijoitettu keskitetysti instrumenttisiltaan, jotta asetuksista on helppo saada yleiskuva. Näyttöä voidaan käyttää koskettamalla, ja olemme varmistaneet, että keskeisiä toimintoja voi muuttaa jalkaohjaimella. Näin minimoidaan instrumenttisillan koskettaminen.

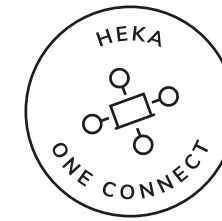

Näyttö ja tilannenäkymä, kuvassa matalanopeuksinen mikromoottori-instrumentti.



Tyypillinen ongelma on, että jos näytössä on liikaa tietoa, sitä ei voi hallita, vaan siihen keskittyminen vie enemmän aikaa. Siksi olemme kehittäneet Heka One Connectin, jonka avulla voit valita, mitä tietoja näytössä näkyy kullakin hetkellä, ja saat yleiskuvan tilanteesta yhdellä silmäyksellä. Mielestämme tietojen valitsemisen muokattuun näkymään pitää olla helppoa.

Yleiskuva yhdellä silmäyksellä

Edistyneen moottorinohjauksemme avulla on mahdollista hallita kaikkia parametreja, kuten vääntömomenttia, pyörimissuuntaa, pyörimisnopeutta sekä puhallusta, vesisuihkun valintaa, steriilin veden virtausta ja toimintoja, kuten Auto Reverse ja Auto Forward.

Halutun nopeuden saavuttaminen on helppoa ja tarkkaa, sillä nopeuden minimi- ja maksimirajat voidaan asettaa ja nopeutta voidaan säätää näiden raja-arvojen sisällä jalkaohjaimella. Näin varmistetaan esimerkiksi, ettei käynnissä olevan hoidon kohdalla ylitetä asetettua enimmäisnopeutta.

Nykyisiä asetuksia voi muuttaa tai säätää kosketusnäytöstä ja hallintapaneelin näppäimistöllä.

Heka One Connectin avulla voit mukauttaa Heka S*-hoitoyksikön palvelemaan parhaalla mahdollisella tavalla työpäivääsi - lisäksi järjestelmästä on helppo kerätä tietoja, jos tarvitset yleiskatsauksen hoitotiedoista.

Hoitokoneessa on älykäs ominaisuus vesisuihkun ollessa valittuna joko turbiini- tai mikromoottori-instrumenttiin. Tällöin voidaan valita sekä automaattinen että mekaaninen puhallus, jolloin ruiskua ei tarvitse erikseen käyttää nesteen kuivaamiseen tai poistamiseen alueelta.

Työpäivääsi tukevat ominaisuudet

Heka S⁺ -varsisarja liikkuu kaikkiin suuntiin, joten voit valita instrumenttisillan asennon ja sen, mihin suuntaan pöytä liikkuu oikealta tai vasemmalta puolelta.

Kaikissa hammashoitoyksikön liikuteltavissa nivelosissa on kaksoisneulalaakerit. Tämä varmistaa helpon ja vaivattoman instrumenttisillan liikuttamisen ja sijoittamisen. Lisäksi Heka S⁺:n neulalaakerit ovat ylisuuria, mikä takaa, että liike säilyy alusta alkaen koko Heka S⁺:n käyttöiän ajan ja toimii samalla millimetrin tarkkuudella missä tahansa asennossa, myös silloin, kun tarjottimen, monitorin, röntgenin ja valon aiheuttama kuormitus vaihtelee.



Langaton jalkaohjain

Langaton jalkaohjain mahdollistaa tärkeimpien toimintojen monipuolisen handsfree-käytön koko hoitoprosessin ajan. Olemme kehittäneet kolme erilaista jalkaohjaintyyppiä, joista jokaisen voi mukauttaa työskentelytapaasi sopivaksi.

Pyöreän jalkaohjaimen nerokas ominaisuus on, että sitä voidaan käyttää kaikista kulmista. Näin voit aina hyödyntää sinulle sopivan ergonomisimman työasennon ilman, että jalkaa tarvitsee siirtää hoidon aikana.



Ihanteelliset työskentelyolosuhteet

Ihanteelliset työskentelyolosuhteet syntyvät, kun potilas on rentoutunut. Olemme kehittäneet Heka S⁺ -ratkaisuun potilastuolin, joka sopii niin tiimillesi kuin potilaallekin. Työskentelyolosuhteet ovat ihanteelliset, halusitpa sitten istua tai seistä. Tämä on tärkeää, sillä oikea työasento tuntuu niin kehossa kuin työn sujumisessa. Ohut ja kapea selkänoja mahdollistaa parhaan asennon lähellä potilasta hoidon aikana.

Kokemuksemme potilastuolin suunnittelusta, materiaalivalinnat ja värit täydentävät Heka S⁺:n tyylikästä ja kevyttä muotoilua. Samaan aikaan olemme korostaneet tuolin toiminnallisuutta ja helppoa säätöä jalkakäyttöisellä ohjaussauvalla tai instrumenttisillan ja konsolin näppäimistöillä.



Ratkaisuja, joihin tulet ihastumaan

Hammashoitajan yksikön muoto ja koko ovat tärkeimmät tekijät yksikön sijoittamisessa asentoon, jossa hoitaja voi istua ergonomisesti ja välttää selän kierron. Mitä pienempi hoitajan yksikkö, sitä parempi.

Suurikokoinen hammashoitajan yksikkö rajoittaa sen asettamista oikein suhteessa potilaaseen ja itseesi. Siksi olemme pyrkineet tekemään hammashoitajan yksiköstä erittäin pienikokoisen ja joustavan. Tämän ansiosta se pystytään sijoittamaan parhaalla mahdollisella tavalla kaikissa hoitotilanteissa niin, että sitä voidaan käyttää istuen tai seisten ilman, että kehoon kohdistuu kuormitusta hoidon aikana.

Tehoimu voidaan pysäyttää myös jalkakytkimen avulla. Kevyt painallus jalkakytkimestä riittää pysäyttämään tehoimun, ilman sen takaisinsijoittamista imuyksikköön. Ratkaisu, jolla vältetään selän tarpeeton kiertyminen hoidon aikana.

Hammashoitajan yksikkö on varustettu joustavalle teleskooppivarrelle, joka varmistaa parhaan asennon sekä 2- että 4-kätisissä hoidoissa. Teleskooppivarsi voidaan asentaa myös suoraan potilastuoliin, jolloin työskentelypuolen vaihtaminen vie vain muutaman sekunnin. Tämä tuo joustavuutta hoituhuoneen vaihtamiseen kiireisenä työpäivänä.



Hygieeninen käyttö

Useimmin käytetyt toiminnot sijaitsevat konsolin lasikannessa ja instrumenttisillassa. Olemme keskittyneet esittämään vain kulloisenkin hoitotilanteen kannalta oleelliset toiminnot, jolloin tilanteesta saa helposti yleiskuvan yhdellä silmäyksellä. Käytettävissä olevat toiminnot ovat potilastuolin liikuttaminen, automaattinen imujen puhdistus, automaattinen/manuaalinen lasintäyttö ja sylkykupin huuhtelu. Myös steriilivesijärjestelmän nestevirtausta voidaan muuttaa.

Käyttäjän turvallisuuden vuoksi olemme lisänneet instrumenttisillan näyttöön tietoja, jotka kertovat nopeasti ja helppolukuisesti, jos hammashoitoyksikkö kaipaa huoltoa.





Dokumentoi työsi

Heka S+ helpottaa työn dokumentointia, mikä helpottaa työtäsi ja tuo potilaalle varmuutta heidän hoitonsa suhteen.

Heka S+ -järjestelmän mukana voidaan toimittaa useita eri intraoraali kameramalleja, jotka voidaan liittää hoituhuoneen tietokoneeseen, ja kuva voidaan näyttää hammashoitoyksikön 22 tuuman näytöllä. Vaihtoehtoisesti instrumenttisiltaan voidaan asentaa teline iPadille/tabletille esimerkiksi röntgenkuvien esittämistä varten.

Jotta multimediaratkaisu olisi yksinkertainen ja nopea, sekä kamera että näyttö voidaan liittää vastaanoton olemassa olevaan ratkaisuun, eikä käyttäjä joudu sitoutumaan all-in-one-järjestelmään, joka estäisi vapauden valita vastaanotolle parhaiten sopivan vaihtoehdon. Käytännössä tämä merkitsee pienempiä investointeja ja sitä, että kaikissa hoituhuoneissa voidaan käyttää samaa järjestelmää hammashoitoyksikön tyypistä riippumatta.



Täydellinen hoitovalo

Täydellinen työvalo on edellytys potilaan asianmukaiseen ja ammattimaiseen hoitoon. Heka S+ on varustettu erikoissuunnitellulla LED-käyttövalolla, jossa yhdistyvät täydellisellä tavalla valon voimakkuus, värilämpötila ja valokentän koko.

Valaisinosassa on kaksi peiliä, jotka varmistavat varjottoman työskentelyalueen. Työvalon varren pituus helpottaa valon kytkemistä päälle valaisimen ollessa potilaan pään takana, jolloin alaleuka saadaan hyvin valaistua.

Heka One Connectin avulla yksittäinen käyttäjä voi helposti esisäätää valon voimakkuuden. Esimerkiksi valon voi säätää himmenemään automaattisesti, kun polymerisointivalaisin on käytössä, valon voi säätää sammumaan kun potilastuolia liikutetaan, ja

koko järjestelmässä on valmius tulevaisuuden CAN-väylällä varustettuihin valoihin.


Voit valita työvalon tyyppin tarpeidesi mukaan ja se voidaan toimittaa myös kattoon asennettuna. Heka S+ -ratkaisun valaisin on hyvin kevyt ja vaivaton. Jos kuitenkin haluat jonkin toisen valaisimen, sen asentaminen on luonnollisesti mahdollista uuteen Heka S+ -ratkaisuun.

Prioriteettina huippuluokan hygienia - yhdessä kanssasi

Olemme suunnitelleet Heka S*:n niin, että vastaanotoilla voidaan toimia korkeimpien infektioiden hallintastandardien mukaisesti käyttämällä yksilöllisiä manuaalisia ja automaattisia prosesseja, joiden määräystenmukaisuuden toteutuminen voidaan myöhemmin dokumentoida. Hygieniaa ajatellen tämä luo mielenrauhaa koko tiimillesi ja potilaillesi ja auttaa samalla välttämään turhaa ajanhukkaa.

Kaikki Heka S*:n pinnat ovat sileitä, ja olemme käyttäneet instrumenttisillassa ja konsolin yläosassa karkaistua lasia, joka on kaikkein hygieenisin saatavilla oleva pintamateriaali. Näyttö ja kosketusnäppäimet voidaan luonnollisesti inaktivoida puhdistuksen ajaksi, mikä lisää turvallisuutta ja helpottaa pintojen puhtaanapitoa.

Alumiiniset kahvat, instrumenttisuojus ja sylkykuppi on helppo irrottaa puhdistusta varten, ja kun näitä on käytössä useita sarjoja, niiden vaihtaminen potilaiden välillä on helppoa.

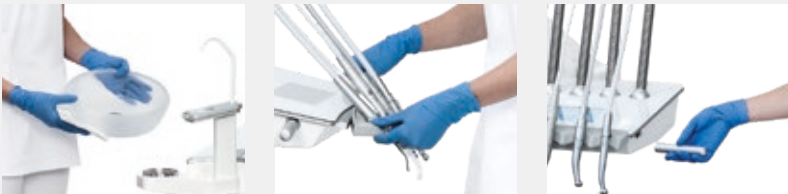

Rakenne mahdollistaa suodattimien ja nesteiden piilottamisen niin, ettei niillä ole vaaraa joutua kosketuksiin Heka S*:n elektroniikan tai virtalähteen kanssa.



Heka S* voidaan varustaa automaattisella instrumenttien vesihuuhtelulla. Näin varmistetaan, että vesijärjestelmä, letkut ja instrumentit huuhdellaan ja valmistellaan seuraavaa potilasta varten nopeasti ja helposti.

Instrumenttisillan näytössä näkyy prosessin tila, ja se voidaan dokumentoida Heka One Connectin kautta.

Painamalla lyhyesti C-näppäintä käynnistetään automaattinen imujenpuhdistusprosessi, jossa imuletku huuhdellaan puhdistusnesteellä, jolloin laitteisto on nopeasti valmis uutta potilasta varten.



Instrumenttisillan näyttö osoittaa, onko prosessi suoritettu oikein. Voit myös dokumentoida prosessin Heka One Connectin kautta.

Myös potilaan hoidon aikana on mahdollista lisätä puhdasta vettä tai puhdistusnestettä esim. veren hyytymisen ja letkujen tukkeutumisen välttämiseksi.

Teemme parhaamme luodaksemme tarpeidesi mukaisia ratkaisuja. Jos vakiovaihtoehtoistamme ei kuitenkaan löydy sopivaa ratkaisua, voit aina ottaa meihin yhteyttä, jotta voimme suunnitella sopivan ratkaisun yhdessä kumppanimme kanssa. Haluamme auttaa sinua nauttimaan hammashoitoyksiköstämme monien vuosien ajan.



Lisävarusteet, jotka saavat Heka S⁺:n tuntumaan omalta

Tarjolla on paljon kiinnostavia lisävarusteita, ja lisää on luvassa. Seuraavassa esiteltävät viitteet auttavat saamaan tietoa Heka S⁺:n tarjoamista mahdollisuuksista. Jos jokin näistä varusteista puuttuu sinulta, keskustelemme mielellämme siitä, hyötyisikö vastaanottosi kyseisestä ratkaisusta.



Steriilivesijärjestelmä



Irrotettavat instrumenttiletkut



Heka ID -kortti



Tablettiteline



Multimedianaäyttö



Röntgenvarsi



instrumenttien huuhtelu



Automaattinen huuhtelujärjestelmä



Vesipullojärjestelmä 1 tai 2 l



Automaattinen imujärjestelmäpuhdistus



Ergo-imu



Potilastuoliin kiinnitetty imuvarsi



Ympäristön valaistus



Heka Design -varsi



Vakiovarsi



USB-virtalähtö



Pikaliitانتä vedelle ja ilmalle



Schuko-pistorasia, ulkoinen



Kaksoisnäyttö



Heka S⁺ Black Edition mustilla lasipinnoilla.



Heka S⁺:ssa on kolme erilaista sylkykuppivaihtoehtoa, joista yhtä voi pyörittää.



Heka S⁺:ssa on kolme erilaista sylkykuppivaihtoehtoa, joista yhtä voi pyörittää.



Heka S⁺:ssa on kolme erilaista sylkykuppivaihtoehtoa, joista yhtä voi pyörittää.



Potilastuoli vaakasuorassa asennossa



Comfort Shape -verhoilu



Comfort Memory -verhoilu



Jopa kolme ohjaussauvaa



Kaksoisniveletty niskatuki



Avoin niskatuki



Käsinojat




Jalkaohjaimen ripustin



Taitettava jalkatuki

Heka S⁺:n tekniset tiedot ja mitat

Piirros perustuu Heka S⁺ -ratkaisuun, jossa on pyörivä sylkykuppi.

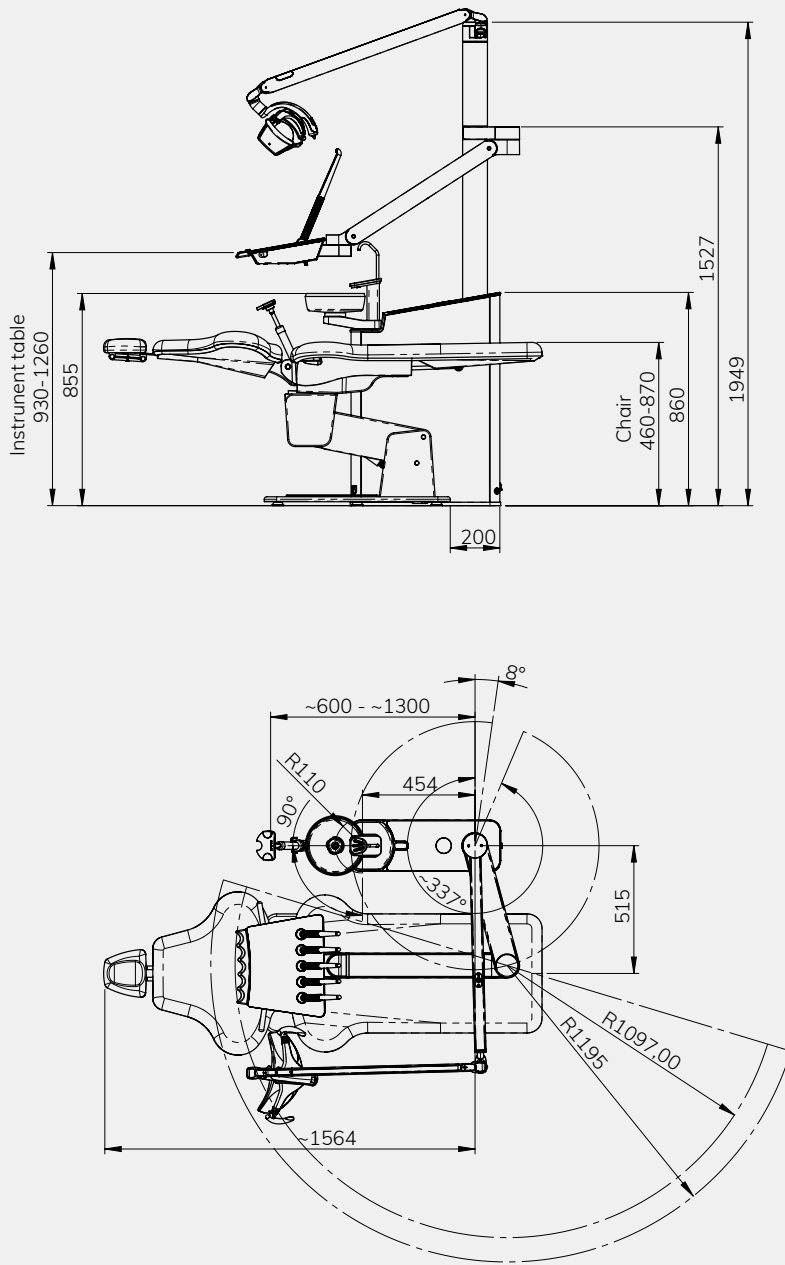

Varataan oikeus teknisiin muutoksiin ja värimuutoksiin. Kuvat voivat sisältää lisävarusteita. Kuvat voidaan näyttää ilman turvamerkintöjä.

Heka S⁺

Hoitoyksikön toimitussisältö (määräytyy valittujen lisävarusteiden mukaan):

- Laadukas tuote alumiinia ja lasia
- Saksalaiset laatuventtiilit
- Lakatut alumiinipinnat
- Konsolin ja instrumenttisillan pinta karkaistua lasia, integroidut kosketuspainikkeet
- Instrumenttitarjottimen varsi valualumiinia
- Tavallista suuremmat kaksoisneulalaakerit konsolissa, keskivarressa ja instrumenttisillassa
- Instrumenttivarren 330°:n rotaatio mahdollistaa oikea- ja vasenkätisen käytön
- Instrumenttivarressa kaksoisjousilla tuettu korkeussäätö
- Nivelten säädettävät asetukset ja korkeussäädettävä instrumenttivarso
- Kevyt ergonomia
- Erikseen tasapainotetut instrumentit
- Valittavissa viiden tai kuuden instrumentin instrumenttisilta
- Hygieeninen, integroitu ja lasipintainen kosketuspaneeli konsolissa ja instrumenttisillassa
- Integroitu näyttö tarjottimessa
- Hygieeniset, autoklaavikäsittelyn kestävät instrumenttipidikkeet
- Irrotettavat, autoklaavikäsittelyn kestävät instrumenttisillan kahvat
- Poistoilmasuodatin
- Irrotettava lasinen sylkykuppi
- Selektiivinen imu (suuri ja pieni) joustavassa teleskooppiapuvarressa

Lisävarusteet ja vaihtoehdot:

- Instrumenttiletkut pikaliittimellä

Turbiini:

- nopea Multiflex, kuituoptiikka
- valinnaisena vaihtuvanopeuksinen turbiinin ohjaus

Mikromoottorit:

- Bien Air MX2 iOptima-säätimellä tai ilman, 100–40 000 kierr./min. (enintään 2 kpl)
- Bien Air, MCX, 1 000–40 000 kierr./min. (enintään 3 kpl)
- Bien Air MX-I 100–40 000 kierr./min, automaattinen ilmanvaihto, implantointiin ja kirurgiaan

Ruiskut:

- UNIC, 3:1
- Luzzani, 3:1

- Luzzani 6:1 lämmityksellä
- Luzzani, 7:1 lämmityksellä ja valolla

Hammaskivenpoistajat:

- Newtron varustettuna LED-valolla tai ilman
- W&H varustettuna LED-valolla
- EMS "No Pain" varustettuna LED-valolla tai ilman
- NSK Varios varustettuna LED-valolla tai ilman
- EMS Airflow: sisäänrakennettu versio

Valokovetin:

- UNIC (Bluedent Express)
- Starlight Sler (painike- tai jalkaohjainaktiivointi)
- Acteon MiniLED (painike- tai jalkaohjainaktiivointi)

Suukamerat:

- Sopro 617 tai 717
- Dürr VistaCam iX HD

Instrumenttivarso- ja tarjotinvaihtoehdot:

- Eripituiset tarjotinvarret
- Valinnaisena kaksoistarjottimen varso
- Yksittäis- tai kaksoistarjotin
- Tarjottimen suoja Levy (autoklaavin kestävä)

Näyttö:

- 22 tuuman näyttö valaisinvarteen joustavalla varrella kiinnitettynä
- iPad-/tablettiteline instrumenttisillassa

Vesi ja vedenkäsittely:

- Veden dekontaminointi ilma-alla tai ilman
- Sisäinen vesipullo - 1 litra
- Ulkoinen vesipullo - 2 litraa
- Automaattinen instrumenttien huuhtelu
- Steriilivesipumppu
- Automaattinen imujen puhdistusjärjestelmä

Viemäröinti:

- Dürr-venttiili
- Metasys-venttiili
- äDürr Combi Separator (amalgamierottelija)
- Metasys-amalgamierottelija
- Metasys, Ilman ja veden erottelija

Konsoli:

- Integroitu tai kääntyvä Sylkykuppi tai ilman sylkykuppia

- Moniväriset LED-valot konsolissa ja sylkykupissa
- Veden lämmitys kupin täyttämistä varten
- Veden lämmitys kupin täyttämistä ja instrumentteja varten
- Pikaliitäntä imulle
- Pikaliitäntä vedelle ja ilmalle
- 230 V Schuko-pistorasia
- Röntgenvarsi
- USB-liitäntä
- Ergo-imu (imun pysäytys)

Hoitovalaisimet ja tilan valaisu:

- Faro Maia LED -hoitovalaisin 35 000 luksia, 5 000 K, vakiovarsi
- Faro Alya LED -hoitovalaisin 50 000 luksia, 5 000 K, anturi, vakiovarsi
- Faro Alya -hoitovalaisin 50 000 luksia, 5 000 K, Heka Design -varsi
- FARO Alya LED -valaisin, Heka Design -varsi ja sisäänrakennettu THEIATECH
- Faro Sidèrea LED -huonevalaisin

Röntgen:

- X-Mind-röntgen D/C: UNIC-versio

Hammashoitajan varren instrumentit:

- UNIC 3:1
- Luzzani 3:1
- Valokovetin, painikeaktiivointi
- Valittavissa varren asentaminen tuoliin

Jalkaohjain:

- Ergonominen pyöreä (langaton)
- Pyöreä vaihtuva (langaton)
- Yleiskäyttöinen vaihtuva (langaton)

UnicLine-potilastuoli:

- Kaksi sähkömoottoria
- Testattu nostokapasiteetti enintään 220 kg (lattiakiinnitys)
- Nostimet seisten hoitamista varten
- Makuuasento saatavilla
- Kaksoisniveletty niskatuki
- Yksi ohjaussauva (korkeintaan kolme ohjaussauvaa)
- Reiällinen suuri päätuki
- Käsinojat - oikea ja/tai vasen, kääntyvä
- Jalkalauta, taitettava
- Ripustin jalkaohjaimelle

Verhoilu:

- Comfort Shape -verhoilu (vakio)
- Comfort Memory -verhoilu

Saatavilla olevat

verhoiluvärit on lueteltu osoitteessa www.heka-dental.com

Kannamme vastuumme - ja varmistamme parhaan mahdollisen hoidon

Meillä on aina käytössämme joukko asiantuntijoita ratkomaan ongelmia.

Olemme Heka Dentalilla yhteistyökumppaneidemme kanssa tietoisia siitä, kuinka tärkeää paras mahdollinen hoitotilojen käyttöaste vastaanotoille on. Siksi emme koskaan tingi materiaalivalinnoista, kun suunnittelemme hammashoitoyksiköitä, ja olemme todistetusti markkinoiden parhaiden joukossa, kun puhutaan kestävyydestä ja luotettavuudesta.

Jos ongelmia ilmenee, käytössämme on aina asentajaverkosto, ja lähetämme asentajan paikan päälle varmistamaan, että pääset pian jatkamaan työtäsi. Koska meillä on paikallisia varaosavarastoja Euroopassa ja Euroopan ulkopuolella, pystymme aina hoitamaan toimitukset nopeasti.



Ajattelemme tulevia sukupolvia

- Heka Dental auttaa minimoimaan ympäristövaikutuksia, sillä tuotteillamme on pitkä käyttöikä.
- Käytämme alumiinia, jonka elinkaari on pidempi kuin useimpien muiden metallien, ja käytämme myös kierrätettävää alumiinia.
- Teemme jatkuvasti yhteistyötä toimittajiemme kanssa vähentääksemme tuotantoprosessimme energiantarvetta etsimällä parempia kuljetusvaihtoehtoja ja erityisesti kehittämällä ja suunnittelemalla tuotteitamme niin, että niitä voidaan kasvavassa määrin käyttää uudelleen.



Heka Dental A/S
Baldershøj 38
2635 Ishøj
Tanska
Puhelin: +45 43 32 09 90
Sähköposti: info@heka-dental.dk
heka-dental.com



Kotisivu



Facebook



LinkedIn



Instagram