

3M™ Filtek™

Z250 yleistytemateriaali
P60 taka-alueen täytemateriaali

**Uudet täytemateriaalit -
vähäisempi kovettumiskutistuminen
ja lyhyempi kovetusaika**



3M *Luotettavuutta*



Yli 30 vuoden ajan

3M Dental on kehittänyt

täyttemateriaalien

teknologiaa.

3M™ Filtek™ tuotenimi

pitää sisällään **uudet**

3M täyttemateriaalit.

Hammaslääkäreille, jotka

arvostavat **kauneutta ja**

toimivuutta, Filtek

takaa **esteettisyyttä**,

pitkäaikaisia ja

erinomaisia

tuloksia. Tämän lisäksi

uusi teknologia tuo

käsittelyn

helppouden ja

ajansäästön sekä

hammaslääkärin ja potilaan


eduksi.



- **Kutistuu vähemmän uuden muoviteknologian ansiosta**
- **Ideaalinen käsiteltävyys kehitetty yhdessä suomalaisten hammaslääkäreiden kanssa**
- **Erinomaiset fysikaaliset ominaisuudet ja kulumiskestävyys**

3M Filtek Z250 yleistöyttemateriaali

Täyttemateriaali kaikkiin täytteisiin

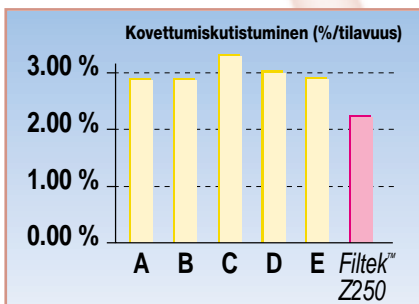

- Alhainen kovettumiskutistuminen: aiheuttaa vähemmän stressiä hampaalle ja vähentää jälkisensitiivisyyttä
- Pieni keskimääräinen partikkelikoko (0.6 µ) pyöreät filleripartikkelit
- Korkea fillerilataus (60 %) Ainutlaatuinen patentoitu filleri
- Erinomainen esteettisyys
 - 15 eri värisävyä
 - kapsleina ja ruiskuina
 - 3 vuoden säilyvyysaika
- Nopea, helppo ja monikäyttöinen
 - lyhyt valokovetus aika: 20 sekuntia/2,5 mm kerros





- Oikea viskositeetti ja hyvät käsittelyominaisuudet
- Vähäinen kutistuminen
- Lyhyt valokovetus aika: 20 sekuntia/2.5 mm kerros

3M™ Filtek™ P60 täytemateriaali

Suunniteltu taka-alueen täytteisiin




- Aikaa säästävä
 - uusi annostelutekniikka
 - uusi ruisku parempaan annosteluun
 - hyvä käsiteltävyys instrumenteilla

Annostelu aika sidosaineen kanssa				
Sidosaine	49	77	67	111
Eriste			45	
Yhdistelmämuovi 5 mm kerros	40	70	40	120
Viimeistelylakka			75	
Yhteensä	89	147	227	231
	Filtek™	A	B	C
	P60	Ei sisällä preparointi-/ valmistelu aikkaa		

Aika sekunneissa

- Erinomainen esteettisyys: 3 väriä (A3, B2 ja C2)
- Pitkäaikaiset tulokset
 - uudistettu fillerien valmistusprosessi ja muovitekniikka
 - vastustaa tehokkaasti lohkeamista ja fraktuuroja

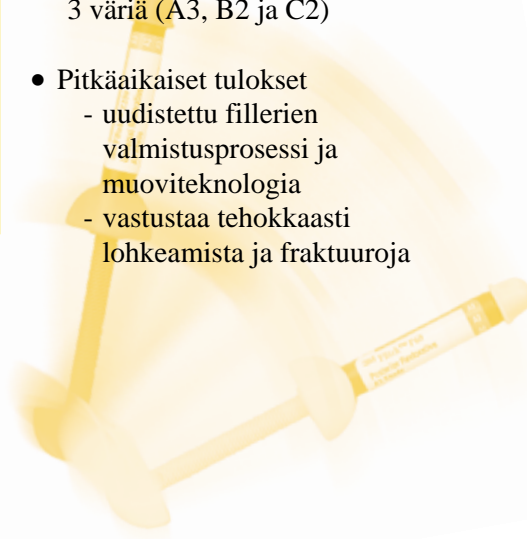

Uutuus! 3M™ Sektorimatriisin kiristyssysteemi

Helppo käyttää!



Saadaksesi hyvät kontaktit taka-alueen täytteisiin 3M tuo markkinoille helppokäyttöisen kiristyssysteemin, jossa on esimuotoillut matriisit. Se antaa varmuutta ja luotettavuutta työskentelyyn sekä hyvät kontaktit...

3M™ Scotchbond™ 1 sidosaine

Paremmat kliiniset tulokset

• 3M Scotchbond 1 sidosaine sopii erinomaisesti Filtek täytemateriaaleille yksinkertaisen tekniikan ja erinomaisen annostelujärjestelmän ansiosta.

• Viimeisimmät IADR tutkimukset antavat 3M Scotchbond 1 sidosaineelle erinomaiset tulokset helppokäyttöisyydestä sekä korkeasta sidoslujudesta.



3M™ Filtek™ tilaustiedot

3M Filtek Z250 yleistytemateriaali



6020 peruspakkaus:

- 4 x 4 g 3M Filtek Z250 ruiskua väreit A2, A3.5, A4, B3
- 1 x 3 ml 3M Scotchbond™ 1 sidosaine
- 1 x 3 ml 3M Scotchbond ortofosforihapporuisku (35 %) ja vientineulat
- Tarvikkeet

6020 TK kokeilupakkaus:

- 1 x 4 g 3M Filtek Z250 ruisku väri A3
- 1 x 3 ml 3M Scotchbond 1 sidosaine
- 1 x 3 ml 3M Scotchbond ortofosforihapporuisku (35 %) ja vientineulat
- Tarvikkeet



6021 peruspakkaus:

- 50 x 0,20 g 3M Filtek Z250 kapsleita väreit A2, A3, A3.5, A4, B2
- 1 x 3 ml 3M Scotchbond 1 sidosaine
- 1 x 3 ml 3M Scotchbond ortofosforihapporuisku (35 %) ja vientineulat
- Tarvikkeet

6021 TK kokeilupakkaus:

- 10 x 0,20 g 3M Filtek Z250 kapsleita väri A3
- 1 x 3 ml 3M Scotchbond 1 sidosaine
- 1 x 3 ml 3M Scotchbond ortofosforihapporuisku (35 %) ja vientineulat
- Tarvikkeet

3M Filtek Z250 refillit

värit	Tuotenumero	
	ruiskut	kapselit
A1	6020A1	6021A1
A2	6020A2	6021A2
A3	6020A3	6021A3
A3.5	6020A3,5	6021A3,5
A4	6020A4	6021A4
B0.5	6020B0,5	6021B0,5
B1	6020B1	6021B1
B2	6020B2	6021B2
B3	6020B3	6021B3
C2	6020C2	6021C2
C3	6020C3	6021C3
C4	6020C4	6021C4
D3	6020D3	6021D3
Inkisaali	6020I	6021I
Universaali dentiini	6020UD	6021UD

3M Filtek P60 taka-alueen täytemateriaali



4720 peruspakkaus:

- 3 x 4 g 3M Filtek P60 ruiskua väreit A3, B2, C2
- 1 x 3 ml 3M Scotchbond 1 sidosaine
- 1 x 3 ml 3M Scotchbond ortofosforihapporuisku (35 %) ja vientineulat
- Tarvikkeet

3M Filtek P60 refillit

- 4720A3** 3M Filtek P60 täytemateriaali 1 x 4 g ruisku, väri A3
- 4720B2** 3M Filtek P60 täytemateriaali 1 x 4 g ruisku, väri B2
- 4720C2** 3M Filtek P60 täytemateriaali 1 x 4 g ruisku, väri C2

CE 0086

3M™ Sektorimatriisin kiristyssysteemi

8900F pakkaus sisältää:

100 pientä matriisinauhaa, 100 standardikokoista matriisinauhaa, 25 suurta matriisinauhaa, 4 kiristysrengasta standardiulokkeilla, 3 kiristysrengasta pitkällä ulokkeilla, 1 asetuspihdit, käyttöohjeet, 1 kuvallinen tekniikkaohjekortti, 1 muovirasia

8900 pakkaus sisältää:

100 pientä matriisinauhaa, 100 standardikokoista matriisinauhaa, 25 suurta matriisinauhaa, 4 kiristysrengasta standardiulokkeilla, 3 kiristysrengasta pitkällä ulokkeilla, käyttöohjeet, 1 kuvallinen tekniikkaohjekortti, 1 muovirasia

CE

3M

Suomen 3M Oy
Hammashoitotuotteet

PL 90
02601 ESPOO
Puh. (09) 52521

Painettu kierrätyspaperille
Painettu E.E.C. © 3M 1999

3M, Filtek ja Scotchbond ovat 3M:n rekisteröimiä tavaramerkkejä.