




Helppo yhdistelmä SDR:n kanssa

Käytä Palodent® Plus sektorimatriisijärjestelmää yhdessä SDR:n kanssa! Se on nopea ja helppo tapa saada hyvä saumatiiviyys, tarkka kontakti ja kestävä täyte!



Perinteinen tekniikka

SDR™
Smart Dentin Replacement

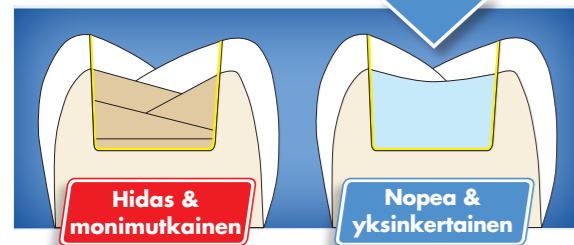

- 4mm:n erät ilman kerrostamista
- Juokseva konsistenssi –erinomainen kaviteettiin mukautuminen
- Yhteensopiva kaikkien sidosaineiden kanssa*

*Yhteensopiva kaikkien metakrylaattipohjaisten sidosaineiden ja yhdistelmämuovien kanssa

Tilaustiedot

659700 Introductory Kit
100 matriisia-25 kpl jokaista kokoa:
3.5mm, 4.5mm, 5.5mm, 6.5mm
75 kiilaa – 25 kpl jokaista kokoa: small, medium, large
30 WedgeGuardia -10 kpl jokaista kokoa: small, medium
1 yleisrenkas, 1 kapea renkas, 1 renkaanasetuspihdi, 1



625.00.001 Starter Kit
20 matriisia – 15 x 5.5mm, 5x4.5mm
15 kiilaa – 5 jokaista kokoa: small, medium, large
5 WedgeGuardia – medium
2 x yleisrenkas, 1 renkaanasetuspihdi, 1 pinsetti
1 SDR näyte: 4 Compula® annostelukärkeä (à 0,25g)



Matriisi refill		Matriisi, refill EZ Coat	
659710	Koko 3.5 mm (50 kpl)	659610	Koko 3.5 mm (50 kpl)
659720	Koko 4.5 mm (50 kpl)	659620	Koko 4.5 mm (50 kpl)
659730	Koko 5.5 mm (50 kpl)	659630	Koko 5.5 mm (50 kpl)
659740	Koko 5.5 mm (100 kpl)	659640	Koko 5.5 mm (90 kpl)
659750	Koko 6.5 mm (50 kpl)	659650	Koko 6.5 mm (50 kpl)
659860	Koko 7.5 mm (50 kpl)	659660	Koko 7.5 mm (50 kpl)

Renkas refill	
659760	Yleisrenkas (2 kpl)
659770	Kapea renkas (2 kpl)

Kiila refill	
659780	Small (100 kpl)
659790	Medium (100 kpl)
659800	Large (100 kpl)

WedgeGuard, refill	
659830	Small (50 kpl)
659840	Medium (50 kpl)
659850	Large (50 kpl)

659810 Renkaanasetuspihdi (1 kpl)

659820 Pinsetit (1 kpl)

DENTSPLY Nordic Baltic
Box 2024, Flygfällsgatan 12
SE-128 21 Skarpnäck
Fax +46 (0) 8 447 60 55
www.dentsply.se

Paikalliset yhteystiedot, katso:
www.dentsply.se
www.dentsply.no
www.dentsply.dk
www.dentsply.fi

SDR™
Smart Dentin Replacement

606.03.002 SDR™ Refill
15 Compula® annostelukärkeä
(à 0,25g), universaali sävy



606.03.003 SDR™ Eco Refill
50 Compula® annostelukärkeä
(à 0,25g), universaali sävy
1 SDR säilytysrasia



TYPER & Original/EO Grafiska 1312

TÄYDELLISET KONTAKTIT



PalodentPlus™
Sektorimatriisijärjestelmä



For better dentistry

DENTSPLY

For better dentistry

DENTSPLY

Sektorimatriisit II-luokan täytteisiin

- ✓ Aina hyvät kontaktit
- ✓ Hyvä saumatiiviys
- ✓ Vähemmän ylimääriä, vähemmän viimeisteltävää
- ✓ Helppokäyttöinen järjestelmä

Muotoiltu marginaalireuna täyteen anatomisen muodon saavuttamiseksi

Suoja gingivaaliksi- aksiaalikulmassa estää vajaa/ylitötön

Palodent Plus EZ pinnoitteella
Erittäin ohut, tarttumaton pinnoite uskomattoman helppoon matriisinauhan poistoon. Värikoodattu kokojen erottamiseksi toisistaan.



Parempi muotoilu: matriisi myötäilee hammasta

Renkas nikkelititaania, joustaa ja kestää, voidaan autoklavoida jopa 1000 kertaa

Liуска helpottaa matriisin asettamista ja poistamista

Lasikuituvahvistetut V-muotoillut muovikannat pitävät kiilan paikallaan

Reiät pinseteille helpottavat kiilan asettamista ja poistamista

MOD



Parodontaalinen tapaus



Puuttuva kuspi



SUOJAAVAT WEDGE GUARDIT

- + Suojaa naapurihammasta preparoinnin aikana
- + Helpottaa ja nopeuttaa kaviteetin preparointia
- + Suoja poistetaan preparoinnin jälkeen, kiila jää paikalleen



ANATOMISESTI MUOTOILLUT KIILAT

- + Muotoillut kiilat on helppo asettaa paikalleen tiiviisti
- + Uurre kiilan alapuolella helpottaa vastakkaiselle puolelle asetettavan kiilan laittamista



LIUSKALLISET MATRIISIT

- + 3.5 mm: lapsille ja pieniin premolaari kaviteetteihin
- + 4.5 mm: keskikokoisiin kaviteetteihin
- + 5.5 mm: yleisin koko molaareihin II-luokan kaviteeteissa
- + 6.5 mm: syvät ja laajat kaviteetit, kuspikorjaukset molaareissa
- + 7.5 mm: syvät ja laajat kaviteetit, kuspikorjaukset molaareissa



RENKAANASETUSPIHDIT

- + Lukko ja taivutetut kärjet kiinnittävät renkaan turvallisesti
- + Uurteet renkaan uudelleenmuotoiluun



ERIKOISPINSETIT

- + Pinseteissä on erikoiskärki jolla saa hyvän otteen matriisista/kiilasta
- + Automaattisesti suljetut pinsetit: ei riskiä tiputtaa matriisia/kiilaa
- + Pinsetin kärjessä valettu piikki



VAHVAT NI-TI RENKAAT

- + Yleisrenkas molaareille (vaaleansininen)
- + Kapea renkas premolaareille (tummansininen)

